




SCHMITZ

A SENSE OF CONFIDENCE

Gynécologie, Urologie et Proctologie

Notre réponse aux exigences d'un équipement parfait et confortable

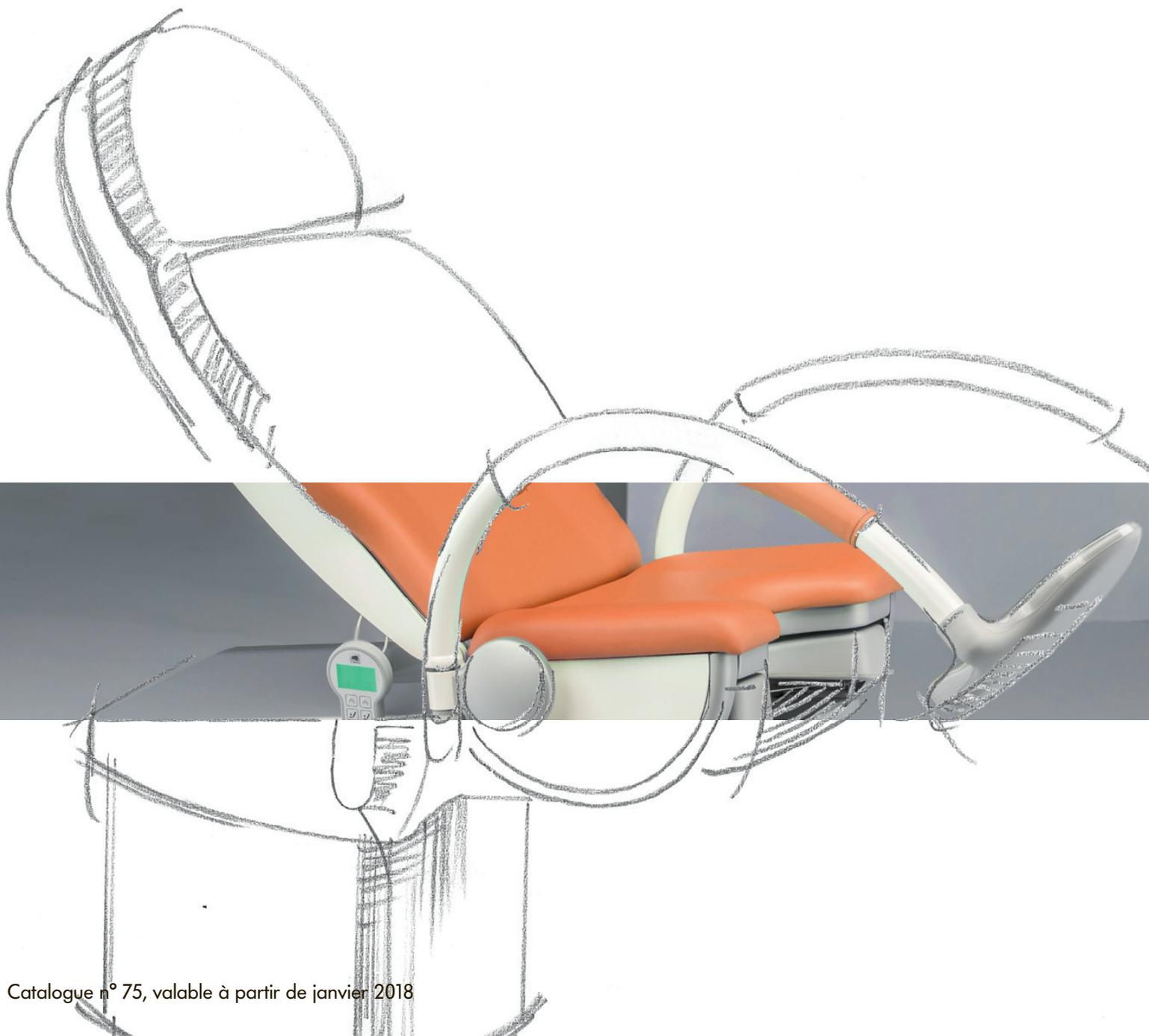



La gamme SCHMITZ pour la gynécologie, l'urologie et la proctologie

medi-matic[®] Série 115

Fauteuils d'examen et de traitement pour la gynécologie et la rectoscopie/proctologie

Page 6 - 19

vidan[®]

Le vidéocolposcope Full HD

Page 20 - 21

Fauteuils d'examen et de traitement pour l'urologie/urodynamique

Page 22 - 25

arco

Fauteuils d'examen et de traitement pour la gynécologie

Page 26 - 35

Fauteuil d'examen et de traitement pour la proctologie

Page 36 - 41

Orbit

Le système d'agencement modulaire mobile

Page 42 - 53

Modèles de planification et aides à la planification

Page 54 - 55

Couleurs

Les couleurs pour la couche de laque, les matières plastique et le rembourrage

Page 56 - 59



Illustration :
medi-matic® 115.7550.1

Rembourrage noisette 104
Revêtement thermolaqué blanc
pur RAL 9010
Éléments en matière plastique
gris argenté

Orbit modules 426.5040.0 et 426.0020.0

couleurs :
Corps aluminium blanc RAL 9006
Façades ivoire clair RAL 1015
Poignées rectangulaires beige sahara RAL 0607030



Illustration :
arco 114.8700.0

Rembourrage limette 99
Revêtement thermolaqué
aluminium blanc RAL 9006
Éléments en matière plastique
gris argenté

Orbit modules 426.5040.0 et 426.0020.0

couleurs :
Corps aluminium blanc RAL 9006
Façades vert feuillage RAL 1206050
Poignées semicirculaires vert citron RAL 1008060



Illustration :
 medi-matic® 115.7550.1
 avec vidan® 113.0002.0

Couleurs :
 Rembourrage vert pomme 94
 Revêtement thermolaqué blanc pur RAL 9010
 Éléments en matière plastique gris argenté



Illustration :
 arco 114.6600.1

couleurs :
 Revêtement thermolaqué
 gris aluminium RAL 9007
 Rembourrage : carmin 92
 Éléments en matière plastique :
 gris argenté

Orbit module 426.5040.0 :

couleurs :
 Corps aluminium gris RAL 9007
 Façades aluminium gris RAL 9007
 Poignées semicirculaires rouge brun RAL 3011 (couleur spéciale)

Nouvelle Série medi-matic® 115

Fonctionnalité, flexibilité et confort accrus

Les exigences du quotidien de la clinique et du cabinet médical sur les plans technique et économique ont été d'une importance vitale dans le concept du medi-matic® 115 : Moins de dépense de temps pour le réglage optimal du fauteuil signifie avoir plus de temps pour vos patients.

- Design élégant et de haut niveau
- Motorisation électrique des supports de pieds (115.7550.1)
- Hauteur, surélévation du bassin et dossier réglable électriquement par commande au pied
- La position d'examen demandée est atteinte en quelques secondes
- Rappel de toutes les fonctions au fauteuil par télécommande
- Gain de temps et confort amélioré grâce à la mémorisation (115.7250.1 + 115.7550.1) de positions et au fonctionnement simultané des moteurs de réglage
- Une hauteur basse permet au patient de s'asseoir en toute sécurité et sans effort – pas besoin d'un marche-pied
- Système de positionnement des jambes facilement escamotable - particulièrement avantageux pour les patients en chaise roulante et pour le transfert
- Un confort tout particulier : le chauffage du siège réglable
- L'entretien et l'hygiène sont facilités grâce à des surfaces lisses et fermées
- Grand choix de couleurs pour des combinaisons de tonalité
- Charge maximale d'utilisation : 200 kg



**reddot award
winner**

115.7550.1 avec supports de pieds 101.4420.1,
plateau de jambes 101.4550.0 et coussin pour
la tête 101.3720.0

Couleurs de l'illustration :
matelas : vert pomme 94
revêtement thermolaqué :
blanc pur RAL 9010
éléments en matière plastique : gris argenté

Design : Rainer Schindhelm



**Un nouveau concept
de commande
visionnaire pour
les fauteuils
medi-matic® 115.7250.1
et 115.7550.1**

- Ecran graphique éclairé pour l'indication des fonctions en cours du fauteuil
- Fonction de diagnostic électronique
- 2 touches de programmation supplémentaires, par ex. pour le chauffage du siège (gynécologie) ou pour l'amenée d'eau du bassin à système de lavage gyroscopique (urologie) et la commande d'une source de lumière froide ou d'un colposcope avec les prises électriques 101.6800.0
- Mémorisation et indication de 8 positions mémorisées (positions de traitement/choix du médecin)
- Réduction des temps de déplacement (cycle) de 50% (115.7250.1 et 115.7550.1)
- La mise en route est sans à-coup et la chronologie des mouvements du fauteuil plus ergonomique
- Commande de tous les mouvements par télécommande manuelle et au pied, au choix



Couleurs d'écran
Bleu : réglage du dossier
Jaune : réglage du siège
Vert : mémoire
Blanc : réglage des appui-pieds
La couleur de l'écran confirme le choix fait sur la commande au pied.

Commande au pied pour 115.7250.1 et 115.7550.1 avec bassin de lavage gyroscopique. La commande d'amenée d'eau se fait grâce à une touche de fonction additionnelle.



Commande au pied pour 115.7250.1 et 115.7550.1 réglage du fauteuil au moyen de la commande au pied.



medi-matic® avec Orbit



Couleurs illustrées

Orbit :

Corps aluminium blanc RAL 9006

Façades ivoire clair RAL 1015

Poignées rectangulaires beige sahara RAL 0607030

medi-matic® :

Remboussage noisette 104

Revêtement thermolaqué blanc pur RAL 9010

Éléments en matière plastique gris argenté



**Veillez consulter les pages 42 à 55
pour des détails sur notre gamme Orbit.**

Plusieurs systèmes de maintien pour les jambes – Vous avez le choix.





115.7550.1 + 101.4550.0 + 101.3720.0




115.7150.1 + 101.2270.0 + 101.1670.0 +
101.1370.0 + 101.1580.0 + 101.3720.0

Couleurs :
Rembourrage : vert pomme 94
revêtement thermolaqué :
blanc pur RAL 9010
éléments en matière plastique : gris argenté



Les mollets de la patiente sont fixés
latéralement dans la cavité de l'Ergo-Steps

115.7150.1 + 101.2310.0 + 101.1370.0 + 101.3720.0

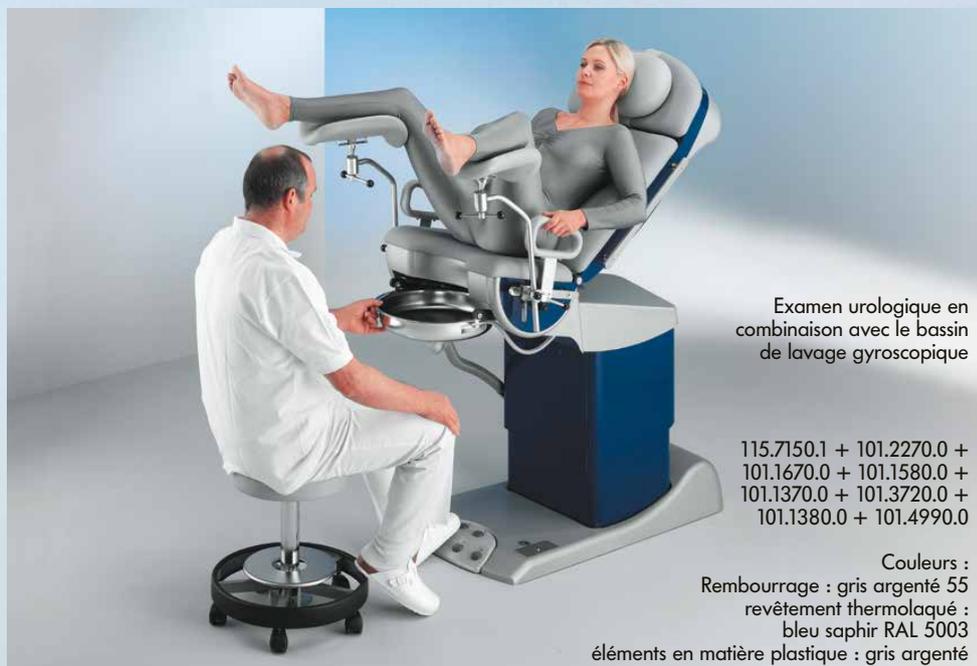

Examen urologique en
combinaison avec le bassin
de lavage gyroscopique

115.7150.1 + 101.2270.0 +
101.1670.0 + 101.1580.0 +
101.1370.0 + 101.3720.0 +
101.1380.0 + 101.4990.0

Couleurs :
Rembourrage : gris argenté 55
revêtement thermolaqué :
bleu saphir RAL 5003
éléments en matière plastique : gris argenté

Note :
Veillez consulter notre catalogue No. 70 à la page 12
pour les tabourets et les sièges d'examen appropriés.

medi-matic® Série 115

pour la gynécologie, rectoscopie/proctologie et pour l'urologie/urodynamique

CE



Modèle no. Désignation

115.7150.1 Fauteuil d'examen et de traitement

Surélévation du bassin et réglage du dossier électriquement, en plus avec réglage en hauteur électrique de 600 – 900 mm, hauteur de montée : 550 mm
Activation des fonctions de réglage au moyen de la commande au pied.

115.7250.1 Fauteuil d'examen et de traitement

Surélévation du bassin et réglage du dossier électriquement, en plus avec réglage en hauteur électrique de 600 – 900 mm, hauteur de montée : 550 mm.
Réglage de mémoire pour 8 positions. Activation des fonctions de réglage ainsi que de mémoire au moyen des commandes manuelle ou au pied.

115.7550.1 Fauteuil d'examen et de traitement

Surélévation du bassin et réglage du dossier électriquement, en plus avec réglage en hauteur électrique de 600 – 900 mm, hauteur de montée : 550 mm.
Réglage de mémoire pour 8 positions.
Réglage électrique des supports de pieds (sans supports de pieds). Prévoir les supports de pieds 101.4420.1 ou les appui-jambes selon Göpel 101.4550.0. Activation des fonctions de réglage au moyen des commandes manuelle ou au pied.

Equipement standard :



Cuvette en matière plastique, amovible.



Magasin intégré pour le rouleau de papier.
Convient pour :
Largeur du rouleau : 400 mm, Ø env. 140 mm.
Largeur du rouleau : 500 mm, Ø env. 120 mm.



Placet amovible : le matelas de siège s'enlève pour un nettoyage optimal ou un remplacement facile.



Support de télécommande manuel en acier inox 18/10, au choix : monté à gauche ou à droite, avec fonction "snap-in". (115.7250.1 et 115.7550.1)

Attention : Tous les modèles de base sans systèmes de soutien des jambes. Vous avez le choix entre quatre systèmes (Svp, voir page 14) Mobilité disponible (voir page 16)



Surélévation du bassin



Réglage du dossier



Réglage de la hauteur



Réglage électrique des supports de pieds (115.7550.1)

Données techniques

Équipement standard :

Assise, dossier et repose-tête sont rembourrés anatomiquement, cuvette en matière plastique, amovible; magasin pour un rouleau de papier de jusqu'à 500 mm de largeur; commande au pied, plaque de base avec 4 vis de niveau; revêtements en matière plastique gris argenté, carrosserie du pied télescopique et cadre de l'assise/du dos avec revêtement thermolaqué selon nuancier, revêtement du matelas selon nuancier. Câble de raccordement de 3,00 m avec fiche (sur demande, préparé pour un raccordement fixe au mur ou au sol, sans câble de raccordement).

Alimentation : 230 V, 50 Hz, max. 0,45 kW.
Exécutions spécifiques selon les pays sur demande.

Charge maximale d'utilisation : 200 kg

Important :

Les fauteuils d'examen équipés de rails latéraux 101.138.0 fixés au dossier sont fournis avec un rembourrage droit pratiquement à fleur avec le cadre métallique du dossier. SVP, voir aussi l'illustration no. 8 de la page 23. 2 prises de courant peuvent être installées selon EN 60601-1!

Voir les accessoires!

Exécutions spécifiques selon les pays sur demande.

Laquage :

Revêtement thermolaqué de haute qualité, surface brillante, résistant bien aux chocs et aux rayures, facile à nettoyer, résistant aux désinfectants, insensible aux influences climatiques.

Couleurs disponibles selon le nuancier SCHMITZ (sans supplément de prix)

Autres couleurs selon le nuancier RAL disponibles moyennant un supplément de prix, N° art. 100.0510.0.







Rembourrage :

Mousse sur plaque-support avec revêtement en similicuir résistant, de première qualité. Couleurs disponibles selon le nuancier SCHMITZ sans supplément de prix (qualités : classic et comfort).

Note de commande :

Veillez nous informer sur les couleurs pour : le rembourrage : selon nuancier, le revêtement du pied télescopique et le cadre de l'assise/du dos : selon nuancier (revêtement thermolaqué).

Réglage, Dimensions :

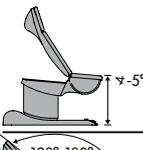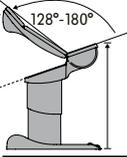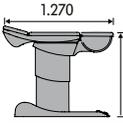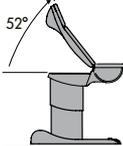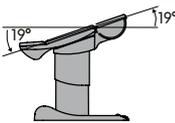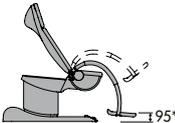	115.7150.1	115.7250.1	115.7550.1
	600-900 mm*	600-900 mm*	600-900 mm*
	550 mm*	550 mm*	550 mm*
	850-1.150 mm*	850-1.150 mm*	850-1.150 mm*
	600-900 mm*	600-900 mm*	600-900 mm*
	0 - 52°	0 - 52°	0 - 52°
	+ 19° - 19°	+ 19° - 19°	+ 19° - 19°
			
Plaque de base	tous les modèles : 1.050 x 575 mm		
Largeur du matelas	tous les modèles : dossier : 560 - 680 mm, assise : 585 mm		
Inclinaison du dossier, électrique	■	■	■
Surélévation du bassin, électrique	■	■	■
Réglage en hauteur, électrique	■	■	■
Réglage de mémoire		■	■
Cuvette	■	■	■
Rails latéraux (assise)	●	●	●
Supports de pieds, électriques			■
Poids net (sans accessoire)	156 kg	156 kg	165 kg

■ = standard

● = contre supplément

* avec la mobilité 101.2300.0 : hauteur augmentée de 75 mm.

Tous droits de modifications de conception et de dimensions réservés.

Supports de pieds inclinables jusqu'à 200 mm au-dessus du sol avec le siège en pos. horizontale et jusqu'à 95 mm au-dessus du sol avec le siège incliné par -5°

medi-matic® Série 115

Accessoires pour toutes disciplines

1

Supports de pieds (paire) 101.4420.1
avec poignées intégrées, revêtement thermolaqué.
Ils peuvent pivoter et être bloqués. Revêtement en
similicuir selon nuancier pour les poignées.
Housses plastiques pour la protection des supports
de pieds.

2

Appui-jambes de Göpel (paire) 101.4550.0
avec poignées intégrées, revêtement thermolaqué.
Revêtement en similicuir selon nuancier pour
les poignées, mousse intégrale en gris argenté pour
les appuis-jambes, avec courroie de fixation,
tige en acier inox.

3

Appui-jambes de Göpel (pièce) 101.2270.0
rembourrage en mousse intégrale en gris argenté, avec
courroie de fixation, tige en acier inoxydable 18/10,
sans étau.
(Prévoir les rails latéraux 101.1370.0 et les étaux
101.1670.0)

3

Rails latéraux (paire) 101.1370.0
pour le siège, en acier inoxydable 18/10,
25 x 10 mm, 290 mm de longueur.

3


Étau (pièce) 101.1670.0
orientable, en acier inoxydable 18/10,
pour montage sur les rails latéraux.


3

Poignée (pièce) 101.1580.0
rembourrage en mousse intégrale en gris argenté,
pour montage sur les rails latéraux 101.1370.0.
(utilisable seulement avec les appuis-jambes 101.2270.0)

4

Ergo-Steps (paire) 101.2310.0
système de soutien des jambes avec cavités réglables
pour le talon et le mollet, matière plastique grise,
pivotant, poignées intégrées, tube de la même couleur
que le fauteuil, éléments de fixation en acier inoxy-
dable 18/10, pour montage sur les rails latéraux.
(Prévoir les rails latéraux 101.1370.0)

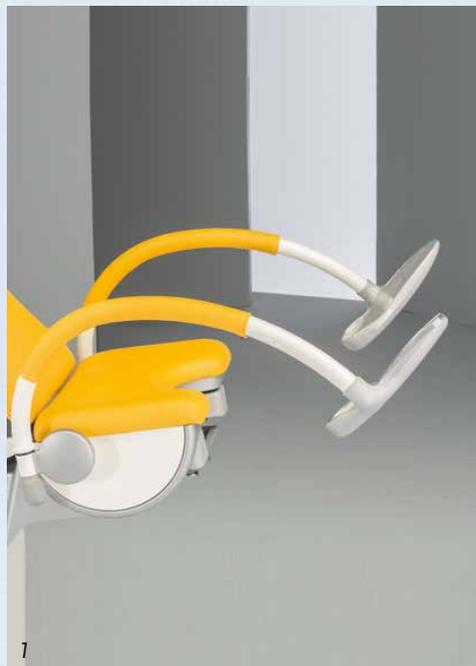

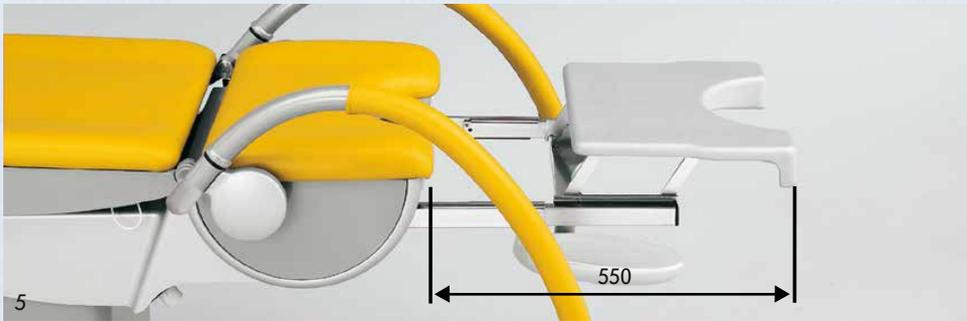

5
Plateau de jambes 101.4450.0
 escamotable, intégré dans le cadre du siège,
 mousse intégrale (L 340 x l 470 x h 20 mm),
 en gris, charge maximale d'utilisation 50 kg.
 (montage ultérieur possible)



6
Plateau de jambes 101.4470.0
 encastrable, matelas avec revêtement en
 similicuir selon nuancier, (L 620 x l 550 x h 45 mm),
 charge maximale d'utilisation 50 kg.
 (montage ultérieur possible)



7
Coussin intermédiaire 101.4460.0
 encastrable, en mousse intégrale, gris,
 pour le plateau de jambes 101.4450.0.
 (montage ultérieur possible)



8
Coussin pour la tête 101.3720.0
 revêtement en similicuir selon nuancier.



9
Housse de protection du siège 101.4810.0
 Feuille PU transparente de haute qualité,
 avec fixation Velcro à l'arrière.



10
Lampe d'examen LED
 En cas d'intérêt, veuillez nous demander la brochure
 no. 107 pour des détails.


Note : La lampe d'examen LED ne peut pas être montée ensemble avec le vidéocolposcope vidan®!

medi-matic® Série 115

Accessoires pour toutes disciplines

1

Unité de traitement „SCHMITZ-Set“ avec bras de support 101.6530.0
réglable dans 2 directions (se tire et se tourne);
set de traitement universel pour instruments,
médicaments, matériel à usage unique, etc.;
montage à gauche ou à droite du fauteuil,
charge maximale d'utilisation : 5 kg

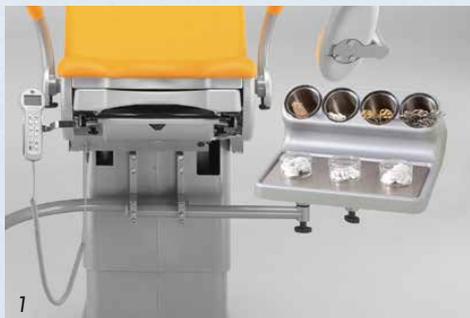

1

2

Plateau de réception avec bras de support 101.6540.0
réglable dans 2 directions (se tire et se tourne);
par ex. pour instruments ou appareils.
Surface utile : 309 x 285 mm,
charge maximale d'utilisation : 10 kg



2

3

Rouleau de papier 100.1760.0
largeur de 400 mm, pour le magasin intégré.



2

4

2 Prises de courant 101.4900.0 pour 115.7150.1
selon EN 60601-1.
(pas de montage ultérieur)

2 Prises de courant 101.4910.0
modèle identique au 101.4900.0,
mais version spéciale pour la Suisse.
(pas de montage ultérieur)



3

5

2 Prises de courant 101.6800.0 pour 115.7250.1 et 115.7550.1
selon norme EN 60601-1, activation d'une prise
par télécommande manuelle.
(pas de montage ultérieur)

2 Prises de courant 101.6810.0
modèle identique au 101.6800.0,
mais version spéciale pour la Suisse.
(pas de montage ultérieur)

Autres prises électriques sur demande.



4+5

6

Support pour les pieds du médecin 101.4750.0

en acier inox.
(non utilisable ensemble avec le bassin à système
de lavage gyroskopique 101.4940.0/101.4990.0 et
la cuvette de récupération d'instruments 101.2040.0)



4+5

7

Marche-pied 101.4520.0

fixé au fauteuil, déplaçable, marche en matière
plastique en gris argenté.
(non utilisable avec la réf. 101.2300.0, 101.2040.0
ou 101.4940.0/101.4990.0)



4+5

8

Housse, plastique (paire) 101.4800.1

Feuille PU transparente, servent à protéger
les supports de pieds



4+5

9

Mobilité 101.2300.0

4 roulettes doubles Ø 75 mm, avec blocage et
antistatiques. (montage ultérieur possible, ne peut
pas être utilisée ensemble avec le bassin à système
de lavage gyroskopique 101.4940.0/101.4990.0)
et le marche-pied 101.4520.0



4+5

Note :
Ce dispositif n'est pas conçu pour le transport de patients.

Accessoires additionnels pour la gynécologie



Cuvette de récupération des instruments 101.2040.0

Ouverture et fermeture électrique de la cuvette de récupération par simple effleurement sur l'avant du tiroir, ouverture complète grâce à des rails télescopiques, cadre avec conteneur CNS de 12 litres (pour 5 litres de liquides), crépine plastique pour récupérer environ 12 spéculums. Surface de rangement supplémentaire en CNS. Charge maximale d'utilisation 8 kg. câble d'alimentation avec prise de branchement, raccordement 100 – 240 V, 50/60 Hz, puissance consommée max. 20 W. Exécutions spécifiques selon les pays sur demande. Montage ultérieur (Série 115.7) sur demande.

S'adapte aussi avec :

Le support de colposcope 101.4310.0 ou **le SCHMITZ-Set avec bras de support 101.6530.0** ou **le plateau de réception avec bras de support 101.6540.0**

Ne peut pas s'adapter avec :

Le support pour les pieds du médecin 101.4750.0
Le marche-pied 101.4520.0
La cuvette en CNS 101.2010.0/101.2020.0

Couvercle 101.2060.0

325 x 265 mm, en acier inox, sert à couvrir le conteneur de 12 litres pendant le transport. (sans ill.)



medi-matic® Série 115

Accessoires additionnels pour la gynécologie



1



2



3



4



101.6530.0 avec 101.4310.0 + colposcope



5

1+2
Support de colposcope 101.4310.0
 pour les systèmes Leisegang, Leica, Kaps et Zeiss,
 peut être monté à droite ou à gauche.
 Pour les systèmes Kaps et Zeiss, svp, commander
 le tube de raccordement avec la porte-plaquette
 chez votre fournisseur du colposcope!
 (sans colposcope)

3
Cuvette peu profonde 101.2050.0
 (supplément de prix) en acier inox 18/10,
 325 x 265 x 40 mm.

4
Cuvette profonde 101.2010.0
 (supplément de prix) en acier inox 18/10,
 355 x 325 x 65 mm.

5
Chauffage du siège 101.4620.0
 Endenchement/Déclenchement par la télécommande
 manuelle, consommation moyenne env. 20 watts,
 indicateur de température réglable sur l'écran.
 (non disponible sur fauteuils avec bassin de lavage
 gyroscopique et sur fauteuil 115.7150.1)

Accessoires recommandés pour la gynécologie



Modèle no.

115.7150.1/115.7250.1

- 1 x **101.3720.0** Coussin pour la tête
- 1 x **101.4620.0** Chauffage du siège
(pour 115.7250.1)
- 1 x **101.4900.0** 2 Prises de courant
(pour 115.7150.1)
- 1 x **101.6800.0** 2 Prises de courant
(pour 115.7250.1)
- 1 x **101.2040.0** Cuvette de récupération
des instruments

Systèmes de positionnement des jambes, au choix :

- 2 x **101.2270.0** Appui-jambes de Göpel
- 2 x **101.1670.0** Etais, orientables
- 1 x **101.1370.0** Rails latéraux (paire)
- 2 x **101.1580.0** Poignées

alternativement :

- 1 x **101.4420.1** Supports de pieds (paire)

alternativement :

- 1 x **101.4550.0** Appui-jambes de Göpel (paire)
avec poignées intégrées

alternativement :

- 1 x **101.2310.0** Ergo-Steps (paire)
- 1 x **101.1370.0** Rails latéraux (paire)

115.7550.1

- 1 x **101.3720.0** Coussin pour la tête
- 1 x **101.4620.0** Chauffage du siège
- 1 x **101.6800.0** 2 Prises de courant
- 1 x **101.2040.0** Cuvette de récupération
des instruments

Systèmes de positionnement des jambes, au choix :

- 1 x **101.4420.1** Supports de pieds (paire)

alternativement :

- 1 x **101.4550.0** Appui-jambes de Göpel (paire)
avec poignées intégrées

vidan[®]

Précis, lumineux, confortable : Le premier vidéocolposcope intégré au monde avec Full-HD et écran de 21.5"

Le complément innovatif de haute technologie des fauteuils d'examen gynécologiques

Assise ergonomique

- vidan[®] peut être utilisé dans une posture d'assise ergonomique optimale et non fatigant, de sorte que l'examen soit facilité pour le médecin

Précision de diagnostic

- Images et vidéos de haute résolution en qualité Full-HD
- Écran pivotable de 21,5" pour un rendu de grand format de l'image ainsi qu'une représentation exacte de la zone examinée
- Éclairage d'examen puissant intégré avec lumière rouge enclenchable pour l'examen extérieur
- Lumière verte et filtre couleur vert électronique additionnel pour une meilleure représentation de tissus lors de frottis

Économie d'espace et gain de temps

- Fonction autofocus ainsi que zoom 6 x à 15 x par pression sur une touche
- Documentation rapide et facile des résultats de l'examen grâce à la fonction de mémorisation d'images et de vidéos
- Disposition claire des éléments de commande
- Pivote librement, de sorte que l'appareil puisse être rangé dans une position de repos peu encombrante
- La connectivité avec le réseau permet la transmission des données d'image et de vidéo au sein du cabinet ou de la clinique

Note :
Veillez consulter notre catalogue no. 109 pour des détails sur le vidéocolposcope vidan[®].



reddot award 2014
winner

Made in Germany





Position de repos peu encombrante

Le vidéocolposcope vidan® peut être librement pivoté et positionné. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il se range dans une position de repos peu encombrante.

Illustration :
 medi-matic® 115.7550.1 avec
 vidan® 113.0002.0

Couleurs :
 Rembourrage : vert pomme 94
 Revêtement thermolaqué : blanc pur RAL 9010
 Éléments en matière plastique : gris argenté

medi-matic® Série 115

Accessoires additionnels pour l'urologie, l'urodynamique

1

Bassin à système de lavage gyroscopique 101.4940.0

seulement pour modèles 115.7250.1 et 115.7550.1
bassin rond Ø 360 mm, en acier inox 18/10, se tirant à l'extérieur, arrêt dans toutes les positions désirées.

Version hygiénique sans bord. Siphon à installer (par le sanitaire) dans la paroi murale ou au sol. Arrivée d'eau par la commande au pied et à la main, écoulement d'eau par un tuyau flexible avec tubulure de Ø 40 mm.

Le système est conforme à la norme DIN EN 1717.

Remplace le bassin standard en plastique.

Pas d'installation ultérieure!

Une housse plastique 101.4810.0 pour le siège est incluse.



2

Crépine de réception 100.1840.0

ronde, en acier inox, pour le bassin à système de lavage gyroscopique.

3

Support latéral 101.4970.0

en acier inox, pour le bassin de lavage gyroscopique, montage à gauche ou à droite.

4

Bassin 101.2020.0

en acier inox 18/10, bassin grand et rond, Ø 360 mm, 350 mm de largeur, 320 mm de longueur, 65 mm de profondeur, avec écoulement, soupape et tuyau de 3/4", 1200 mm de longueur.

Remplace le bassin standard en plastique.

Une housse plastique 101.4810.0 pour le siège est incluse.



Seau de 12 l. 100.1350.0

en acier inox 18/10, avec une ouverture dans le couvercle pour y faire passer un tuyau.





5
Goulotte d'écoulement des fluides 101.6600.0
en acier inox, montage derrière la partie du siège

6
Coussin spécial du siège (supplément) 101.4950.0
pour le système «Urodynamique»,
585 mm de largeur, 350 mm de longueur.
Remplace le coussin standard

Adaptateur du siège 101.4960.0
2 parties, pour le système «Urodynamique».
Chaque partie : 220 mm de largeur,
150 mm de longueur
(nécessite les rails latéraux 101.1390.0)

7
Barre de soutien 101.4980.0
pour obtenir un angle d'inclinaison de 80°,
pour le matelas dorsal

8
Rails latéraux (paire) 101.1380.0
en acier inox, 25 x 10 mm, au dossier,
pour fixer les accessoires, 480 mm de longueur
(pas de montage ultérieur)

Note :
Les fauteuils d'examen équipés de rails latéraux 101.138.0 fixés au dossier sont fournis avec un rembourrage droit pratiquement à fleur avec le cadre métallique du dossier (voir im. 8).

9
Rails latéraux (paire) 101.1390.0
en acier inox, 25 x 10 mm, longueur 150 mm,
pour l'assise, utilisant 101.4420.1 ou 101.4550.0 pour
application de l'adaptateur du siège 101.4960.0.
Pas d'installation ultérieure!

10
Appui-bras 101.0019.0
rembourrage de mousse intégrale, 450 mm de long,
antistatique, avec sangle de fixation et étau,
réglable horizontalement et verticalement,
peut basculer grâce à une articulation sphérique,
modèle en acier inoxydable.
(nécessite les rails latéraux 101.1380.0)

11
Prise de compensation de potentiel 101.4930.0

medi-matic® Série 115

Accessoires recommandés pour l'urologie



Couleurs illustrées :
Rembourrage gris argenté 55
Revêtement thermolaqué bleu saphir RAL 5003
Éléments en matière plastique gris argenté

Modèle no.

115.7150.1/115.7250.1

- 1 x **101.3720.0** Coussin pour la tête
- 1 x **101.4900.0** 2 Prises de courant (pour 115.7150.1)
- 1 x **101.6800.0** 2 Prises de courant (pour 115.7250.1)

Accessoires au choix :

- 1 x **101.4990.0** Bassin à système de lavage gyroscopique (pour 115.7150.1)
- 1 x **101.4940.0** Bassin à système de lavage gyroscopique (pour 115.7250.1)
- 1 x **100.1840.0** Crépine de réception
- 1 x **101.6600.0** Goulotte d'écoulement

alternativement :

- 1 x **101.2020.0** Bassin avec tuyau d'écoulement
- 1 x **100.1350.0** Seau de 12 l
- 1 x **101.6600.0** Goulotte d'écoulement

Systèmes de positionnement des jambes, au choix :

- 2 x **101.2270.0** Appui-jambes de Göpel
- 2 x **101.1670.0** Etais, orientables
- 1 x **101.1370.0** Rails latéraux (paire)
- 2 x **101.1580.0** Poignées

alternativement :

- 1 x **101.4420.1** Supports de pieds (paire)

alternativement :

- 1 x **101.4550.0** Appui-jambes de Göpel (paire) avec poignées intégrées
- 1 x **101.1380.0** Rails latéraux (paire)
- 1 x **101.0019.0** Appui-bras

115.7550.1

- 1 x **101.3720.0** Coussin pour la tête
- 1 x **101.6800.0** 2 Prises de courant

Accessoires au choix :

- 1 x **101.4940.0** Bassin à système de lavage gyroscopique
- 1 x **100.1840.0** Crépine de réception
- 1 x **101.6600.0** Goulotte d'écoulement

alternativement :

- 1 x **101.2020.0** Bassin avec tuyau d'écoulement
- 1 x **100.1350.0** Seau de 12 l
- 1 x **101.6600.0** Goulotte d'écoulement

Systèmes de positionnement des jambes, au choix :

- 1 x **101.4420.1** Supports de pieds (paire)

alternativement :

- 1 x **101.4550.0** Appui-jambes de Göpel (paire) avec poignées intégrées
- 1 x **101.1380.0** Rails latéraux (paire)
- 1 x **101.0019.0** Appui-bras



Cuvette
101.2020.0 et
seau 100.1350.0

Accessoires recommandés pour l'urodynamique



Couleurs illustrées :
Rembourrage bleu caraïbes 82
Revêtement thermolaqué blanc pur RAL 9010
Éléments en matière plastique gris argenté



Barre
de soutien
101.4980.0, angle
d'inclinaison de 80°



Adaptateur
du siège 101.4960.0

Modèle no.

115.7150.1/115.7250.1

- 1 x **101.4950.0** Coussin spécial du siège
- 1 x **101.1390.0** Rails latéraux (paire)
- 1 x **101.4960.0** Adaptateur du siège
- 1 x **101.4970.0** Support latéral*
- 1 x **101.4980.0** Barre de soutien

Systèmes de positionnement des jambes, au choix :

- 2 x **101.2270.0** Appui-jambes de Göpel
- 2 x **101.1670.0** Etau, orientables
- 1 x **101.1370.0** Rails latéraux (paire)
- 2 x **101.1580.0** Poignées

alternativement :

- 1 x **101.4420.1** Supports de pieds (paire)

alternativement :

- 1 x **101.4550.0** Appui-jambes de Göpel (paire)
avec poignées intégrées
- 1 x **101.1380.0** Rails latéraux (paire)
- 1 x **101.0019.0** Appui-bras

115.7550.1

- 1 x **101.4950.0** Coussin spécial du siège
- 1 x **101.1390.0** Rails latéraux (paire)
- 1 x **101.4960.0** Adaptateur du siège
- 1 x **101.4970.0** Support latéral*
- 1 x **101.4980.0** Barre de soutien

Systèmes de positionnement des jambes, au choix :

- 1 x **101.4420.1** Supports de pieds (paire)

alternativement :

- 1 x **101.4550.0** Appui-jambes de Göpel (paire)
avec poignées intégrées
- 1 x **101.1380.0** Rails latéraux (paire)
- 1 x **101.0019.0** Appui-bras

***A noter :**

Le support latéral est nécessaire pour le dépôt latéral du bassin à système de lavage gyroscopique 101.4940.0 ou 101.4990.0.

arco

Confort accru, design exceptionnel

Le nouvel arco allie design remarquable, technologie des plus modernes et rapport qualité/prix imbattable.

Ergonomique

Les coussins du repose-tête, du dossier et de l'assise présentent une forme particulièrement bombée. Associés au coussin de tête à fixation aimantée adaptable à la patiente, ils lui garantissent une sensation de confort. Grâce à sa faible hauteur d'accès de seulement 550 mm, il permet également aux patientes plus âgées ou à mobilité réduite d'y prendre place facilement. L'assise reste toujours bien à l'horizontale, même dans la position la plus basse.

Résistant

Prévu pour résister à une charge d'utilisation de 250 kg, le fauteuil permet de soigner les patientes souffrant d'une surcharge pondérale en toute sécurité.

Rapide

Une vitesse de réglage optimisée ainsi que la possibilité de choisir jusqu'à quatre positions mémorisées (en fonction du modèle) permettent au praticien de régler rapidement le dispositif dans la position souhaitée.

Fonctionnel

La profonde découpe gynécologique de 155 mm garantit un meilleur accès au champ d'examen. La cuvette reste en position horizontale, même en cas de surélévation du bassin.

Mobile

Le fauteuil d'examen peut être rendu mobile grâce à des roulettes cachées (en option), vous permettant ainsi d'utiliser l'espace de traitement et d'organiser la pièce à votre convenance. Un dispositif de blocage centralisé permet de positionner le dispositif rapidement et en toute sécurité.

Hygiénique

Les surfaces planes et fermées ainsi que l'absence de coins ou d'arêtes assurent une hygiène optimale et un nettoyage aisé. Rendre l'arco mobile (fonctionnalité en option) permet aussi de nettoyer l'espace situé dessous.

Made in Germany





Décliné dans de nombreuses couleurs et affichant un design primé, le fauteuil d'examen arco satisfera à toutes vos attentes et s'intégrera parfaitement dans votre salle d'examen d'un point de vue esthétique.



reddot award 2017
winner

Illustration montre :
114.8700.0 avec supports de pieds 101.0456.0,
housses 101.0473.0, cuvette avec support de confort
101.0495.0, éclairage d'ambiance LED 101.0487.0 et
cache coloré 101.0488.0.

Couleurs arco :
rembourrage rouge framboise 103
revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006
éléments en matière plastique gris argenté

arco avec Orbit

Un concept évident pour les cabinets de gynécologie



Que ce soit de par sa faible hauteur d'accès, pratique pour les patientes, la fonction de mémoire qui permet un réglage rapide dans la position souhaitée ou la profonde découpe gynécologique qui facilite l'examen, le fauteuil d'examen arco est adapté aux besoins spécifiques quotidiens de votre cabinet médical.

Le concept modulaire de soins et de collecte pour poste de travail gynécologique Orbit, s'adaptant à tous les environnements de travail, complète à merveille le fauteuil d'examen arco, qui s'intègre ainsi parfaitement au sein d'un équipement fonctionnel, décliné dans de nombreuses couleurs attrayantes.

Veillez consulter les pages 42 à 55 pour des détails sur notre gamme Orbit.



Couleurs illustrées

arco :
Rembourrage rouge framboise 103
Revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006
Éléments en matière plastique gris argenté

Tabouret pivotant :
Rembourrage rouge framboise 103

Orbit :
Corps aluminium blanc RAL 9006
Façades violet bruyère RAL 4003
Poignées semicirculaires aluminium blanc RAL 9006
Éléments en matière plastique gris argenté

arco pour la gynécologie CE



Description



114.8500.0

arco 100 114.8500.0

Fauteuil d'examen et de traitement, réglage électrique de la surélévation du bassin, angle d'inclinaison fixe (50°) entre le dossier et le siège, hauteur d'assise réglable de 550 mm à 1 000 mm via la surélévation du bassin. Activation des fonctions de réglage par commande au pied.



114.8600.0 et 114.8700.0

arco 100 M 114.8600.0

Fauteuil d'examen et de traitement, même version que le 114.8500.0, mais avec fonction mémoire 2 positions supplémentaire. Activation des fonctions de réglage ainsi que des fonctions mémoire par commande à la main et au pied.

arco 200 M 114.8700.0

Fauteuil d'examen et de traitement avec fonction mémoire 4 positions, **réglage électrique** de la surélévation du bassin et **des supports de pieds (accessoire)**, angle d'inclinaison fixe (50°) entre le dossier et le siège, hauteur d'assise réglable de 550 mm à 1 000 mm via la surélévation du bassin. Activation des fonctions de réglage ainsi que des fonctions mémoire par commande à la main et au pied.

Attention !

Les versions de base ne comprennent pas de système de soutien des jambes, veuillez en choisir un parmi les 3 proposés ! (pages 32/33)



Commande au pied et commande manuelle

- Positionnement flexible de la commande au pied amovible pour un travail détendu et confortable ;
- Enregistrement et demande de jusqu'à 4 positions mémorisées ;
- Mise en mouvement en douceur du fauteuil ;
- Commande de tous les mouvements par la commande au pied et la commande manuelle.

Couleurs de l'illustration :

arco :

Rembourrage limette 99

Revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006

Éléments en matière plastique gris argenté

Équipement standard :

Coussins du siège, du dossier et du repose-tête ergonomiques rembourrés, cuvette en acier inox, placée dans une structure en plastique, montage suspendu permettant de maintenir une même position (parallélogramme), amovible, 325 x 175 x 65 mm (l x L x h), 2,5 litres. Magasin pour rouleau de papier 400 ou 500 mm de largeur, diamètre max 140 mm. Avec commande au pied, plaque de base avec 4 vis de réglage, revêtement plastique gris argenté, cadre avec revêtement thermolaqué selon notre nuancier, revêtement des coussins selon notre nuancier. Avec support pour les jambes permettant de retirer rapidement les supports de pieds ou appui-jambes de Göpel avec poignée intégrée ou de les faire pivoter horizontalement individuellement (non disponible sur les équipements avec rails latéraux).

Câble de raccordement de 3 m avec fiche de secteur, raccordement : 100 - 240 V, 50/60 Hz, max. 0,94 kW.
Versions spécifiques à un pays sur demande.

Poids net : env. 96 kg
(114.85000.0 et 114.8600.0)
Poids net : env. 100 kg
(114.8700.0)

Charge maximale d'utilisation : 250 kg

Laquage :


Revêtement thermolaqué de grande qualité. Surface brillante, extrêmement résistante aussi bien aux chocs qu'aux rayures. Facile à nettoyer, résistant aux désinfectants, insensible aux influences climatiques.

Rembourrage :

Mousse sur plaque de support avec revêtement en similicuir résistant, de première qualité. Couleurs disponibles selon le nuancier SCHMITZ sans supplément de prix (classic et confort).

Renseignements pour la commande :

Lors de la commande d'un fauteuil de la série arco, il vous est demandé de nous fournir les informations suivantes : coloris des coussins/matelas, voir nuancier ; coloris du revêtement thermolaqué pour le cadre, voir nuancier.



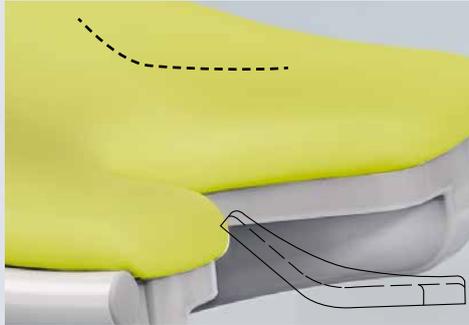


Profil de siège droit pour une position d'examen détendue et adaptée.



Cuvette en acier au nickel-chrome, placée dans une structure en plastique, montage suspendu permettant de maintenir une même position (parallélogramme)

Réglage, Dimensions :

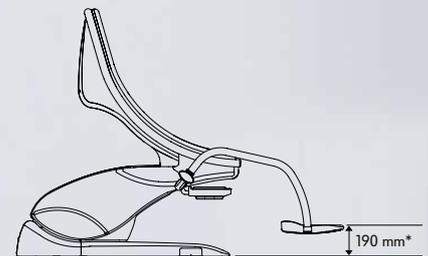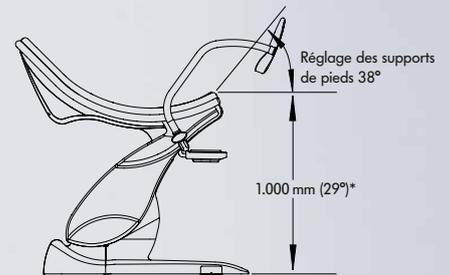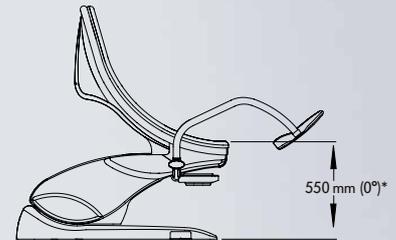

Plaque de base 1.134 x 605 mm

Largeur du matelas 595 mm (siège)
jusqu'à 650 mm (dossier),
50 mm d'épaisseur

* avec la mobilité 101.0466.0 : hauteur augmentée de 11 mm.
Tous droits de modifications de conception et de dimensions réservés.



Surélévation du bassin
114.8500.0 à 114.8700.0

Réglage électrique des supports de pieds
114.8700.0

arco

Système de positionnement des jambes

1

Supports de pieds (paire) 101.0456.0

avec poignées intégrées, revêtement thermolaqué selon nuancier. Peuvent pivoter et être bloqués. Housses plastiques pour la protection des supports de pieds.

2

Appui-jambes selon Göpel avec poignée intégrée (paire) 101.0457.0

avec poignées intégrées, revêtement thermolaqué selon nuancier. Mousse intégrale en gris argent pour les appuis-jambes, avec courroie de fixation, tige en acier inox 18/10.

3

Appui-jambe de Göpel (pièce) 101.0459.0

Mousse intégrale en gris argent, avec courroie de fixation, tige en acier inoxydable 18/10, sans étai. (SVP, prévoir des rails latéraux 101.0461.0 et des étaux 101.1670.0)

Étau (pièce) 101.1670.0

orientable, en acier inoxydable 18/10, pour montage sur les rails latéraux.

4

Rails latéraux (paire) 101.0461.0

pour le siège, en acier inox 25 x 10 mm, 290 mm de longueur.



1

101.0456.0



2

101.04570



3

101.04610, 101.0459.0 et 101.1670.0



4

101.0461.0

arco

Accessoires

1

Housse en similicuir (paire) 101.0473.0
pour les poignées intégrées des supports de pieds,
selon nuancier, avec fermeture-éclair.

2

Housse en similicuir (paire) 101.0474.0
pour les poignées intégrées des appuis-jambes de
Göpel, selon nuancier, avec fermeture-éclair.

3

Coussin pour la tête 101.0472.0
avec fixation magnétique, revêtement en similicuir
selon nuancier.

4

Housse protecteur (paire) 101.0475.0
en matière plastique transparente,
pour les supports de pieds.

Housse protecteur 101.0476.0
pour le rembourrage du siège.
(sans ill.)

5

Rouleau de papier 101.0489.0
largeur de 500 mm, pour le magasin intégré.

6

Cuvette avec support confort 101.0495.0
assurant une position horizontale du bassin, bassin
en acier au nickel-chrome avec cadre plastique,
dimensions : 325 x 175 x 65 mm (l x L x h),
volume : 2,5 litres.





7

101.0462.0



8

101.0482.0 et 101.0481.0



10

101.0487.0 et 101.0488.0



12

101.0466.0



9

101.0467.0

7

Rail latéral (pièce) 101.0462.0
pour le siège, en acier inox 25 x 10 mm,
150 mm de longueur.

8

2 Prises de courant 101.0482.0
selon EN 60601-1. (pas de montage ultérieur)

2 Prises de courant 101.0483.0

modèle identique au 101.0482.0,
mais version spéciale pour la Suisse.
(pas de montage ultérieur)
(sans ill.)

**Prise de compensation de potentiel
101.0481.0**

9

Support de colposcope 101.0467.0
pour les systèmes Leisegang, Leica, Kaps et Zeiss,
peut être monté à droite ou à gauche. Pour
les systèmes Kaps et Zeiss, svp, commander le tube
de raccordement avec la porte-plaquette chez
votre fournisseur du colposcope!
(sans colposcope)

10

Éclairage d'ambiance LED 101.0487.0
Éclairage LED bidirectionnel situé juste au-dessus du
cache coloré, choix parmi 13 couleurs différentes,
changement de couleur au moyen de l'interrupteur
placé sous le cache coloré, couleur par défaut
pré-réglée en fonction de la couleur des coussins.
(LED blanche pour les coussins marron, noirs et gris.)

Cache coloré 101.0488.0

Cache coloré, teinte identique à la couleur des
coussins.

11

**Support pour les pieds du médecin
101.0469.0**

montage à gauche (PDV de la patiente).

**Support pour les pieds du médecin
101.0468.0**

montage à droite (PDV de la patiente).
(sans ill.)

12

Mobilité 101.0466.0

2 roulettes doubles pivotantes Ø 75 mm,
4 roulettes de direction fixe Ø 50 mm, antistatiques,
avec blocage central. (montage ultérieur possible)

Note :

**Ce dispositif n'est pas conçu pour
le transport de patients!**

arco

Fauteuil d'examen et de traitement pour la proctologie

- Un design remarquable, la technologie la plus moderne et un excellent rapport qualité-prix
- Sa faible hauteur permet de s'installer sans effort
- Siège rabattable électriquement
- Le dispositif d'arrêt automatique garantit un positionnement sûr des patients quand le siège est rabattu
- Surélévation du bassin et réglage du siège électriques
- Système de support ergonomique pour les jambes et les pieds avec accoudoirs intégrés pour une position d'examen professionnelle et détendue
- Un grand nombre de couleurs différentes de sellerie et de laquage selon la gamme de couleurs SCHMITZ
- Diverses possibilités d'équipement grâce à un grand assortiment d'accessoires
- Entretien facile et hygiénique grâce à des surfaces lisses et fermées

Le concept de réglage pour arco 114.6600.1

- Écran graphique éclairé pour l'indication des fonctions en cours du fauteuil
- Fonction de diagnostic électronique
- 1 touche de programmation supplémentaire, par ex. pour la commande d'une source de lumière froide moyennant les prises électriques
- Mémorisation et indication de 8 positions (positions de traitement/choix du médecin)
- La mise en route est sans à-coup
- Commande de tous les mouvements par télécommande manuelle et au pied, au choix





Couleurs de l'illustration :
arco revêtement thermolaqué
gris aluminium RAL 9007
rembourrage : carmin 92
éléments en matière plastique : gris argenté

Modules :
Corps aluminium gris RAL 9007
Façades aluminium gris RAL 9007
Poignées semi-circulaires rouge brun RAL 3011
(couleur spéciale)

Fonctions et systèmes de soutien des jambes

1
Faible hauteur de base, permet
de s'installer sans effort

2
Champ de réglage important,
de la surélévation électrique du bassin
jusqu'à la position de choc





3
Positionnement optimal d'examen et de traitement grâce au siège rabattable électriquement; divers systèmes de soutien des jambes.

4
Choix de systèmes de positionnement des jambes :

4.1
avec supports de pieds 101.4560.1.

4.2
avec appuis-jambes selon Göpel 101.4580.0.

4.3
avec Ergo-Steps 101.4570.0.



arco pour la proctologie



Surélévation du bassin et siège rabattable électriquement.



Fauteuil d'examen et de traitement

Modèle no. 114.6600.1

Surélévation du bassin et siège rabattable électriquement.

Sans système de support des jambes.
Réglage de mémoire pour 8 positions.
Activation des fonctions de réglage ainsi que de mémoire au moyen des commandes manuelle ou au pied.

Équipement standard :

Matelas ergonomique pour le siège, le dos et la tête, tablette avec cuvette intégrée et extractible en acier inox 18/10, magasin pour rouleau de papier de jusqu'à 400 mm de largeur, commande au pied, 2 prises de courant intégrées, selon EN 60601-1, dont une peut être activée par la télécommande manuelle, plaque de base avec 4 vis de niveau, revêtement en matière plastique gris argenté, colonne et cadre à revêtement thermolaqué selon notre nuancier.

Revêtement du rembourrage selon notre nuancier. Câble de raccordement 3 m avec fiche de secteur.

Raccordement : 230 V, 50 Hz, 0,3 kW

Exécutions spécifiques selon les pays sur demande. Poids net env. 121 kg

Charge maximale d'utilisation : 180 kg

Laquage :

Revêtement thermolaqué de haute qualité, surface brillante, résistant bien aux chocs et aux rayures, facile à nettoyer, résistant aux désinfectants, insensible aux influences climatiques. Couleurs disponibles selon le nuancier SCHMITZ (sans supplément de prix)

Autres couleurs selon le nuancier RAL disponibles moyennant un supplément de prix, N° art. 100.0510.0.

Rembourrage :

Mousse sur plaque de support avec revêtement en similicuir résistant, de première qualité. Couleurs disponibles selon le nuancier SCHMITZ sans supplément de prix (qualités : classic et confort).






Note de commande :

Veillez nous informer sur les couleurs pour :
le rembourrage : selon nuancier,
la colonne et le cadre de l'assise/ du dos :
selon nuancier (revêtement thermolaqué).

Important :

Arrêt de sécurité de la fonction de surélévation du bassin quand le siège est rabattu.

Fonctions de réglage et dimensions

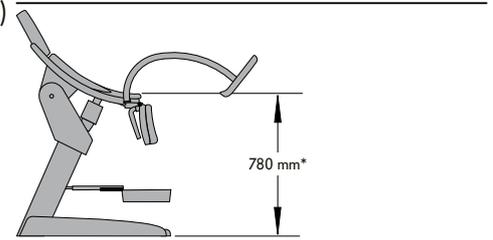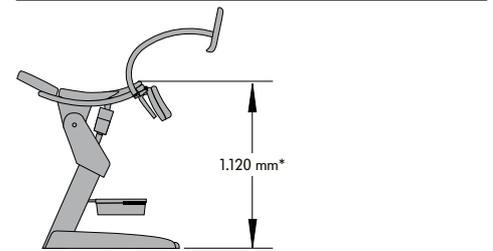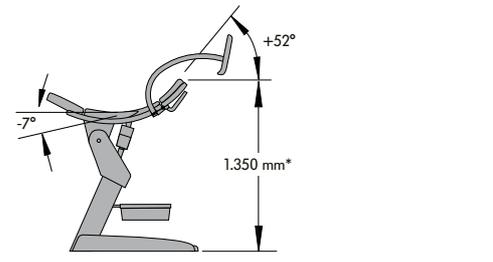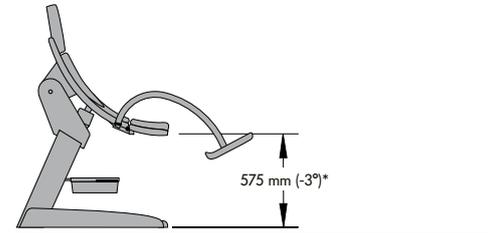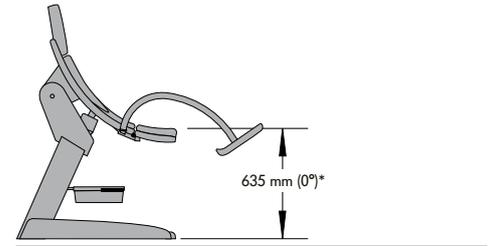

Plaque de base 960 x 565 mm

Largeur de matelas 565 mm (siège)
jusqu'à 695 mm (dossier)

* avec la mobilité 101.0223.0 : hauteur augmentée de 75 mm.
Tous droits de modifications de conception et de dimensions réservés.

Accessoires



1 Supports de pieds (paire) 101.4560.1
avec poignées intégrées, revêtement thermolaqué.
Ils peuvent pivoter et être bloqués.
Housses transparentes en plastique pour la protection
des supports de pieds.

2 Appui-jambes de Göpel (paire) 101.4580.0
avec poignées intégrées, revêtement thermolaqué.
Appuis-jambes en mousse intégrale en gris argenté,
avec courroie de fixation, tige en acier inox 18/10.

3 Ergo-Steps (paire) 101.4570.0
système de soutien des jambes avec cavités réglables
pour le talon et le mollet, matière plastique grise,
pivotant, poignées intégrées, tube de la même
couleur que le fauteuil.

4 Housses, similicuir (paire) 101.4850.0
pour les poignées 101.4560.1 et 101.4570.0,
avec fermeture-éclair, selon nuancier.

5 Housses, similicuir (paire) 101.4860.0
pour les poignées 101.4580.0,
avec fermeture-éclair, selon nuancier.

6 Mobilité 101.0223.0
pour le modèle 114.6600.1, 4 roulettes doubles
Ø 75 mm, avec blocage et antistatiques.
(montage ultérieur possible)

Note :
**Ce dispositif n'est pas conçu pour
le transport de patients.**

7 Coussin pour la tête 101.3730.0
avec fermeture velcro, recouvert
de similicuir selon nuancier.

8 Housses, plastique (paire) 101.4800.1
(PETG), pour la protection des supports pour les pieds.

**9 Tablette avec cuvette intégrée
et extractible**
avec support, à accrocher (mais ne pas à visser)
à la colonne du fauteuil, revêtement par poudrage
de la même couleur que le fauteuil. Sert à positionner
une source de lumière froide.
Dimensions de la tablette 340 x 370 mm (l x P).
Charge maximale d'utilisation 10 kg.
Cuvette 350 x 325 x 65 mm (l x P x H).

10 Rouleau de papier 100.1760.0
400 mm de largeur, pour magasin intégré,
avec matelas dorsal pouvant être retiré.

Orbit

Le concept d'agencement modulaire avec unité d'examens/soins et unité de collecte du matériel usagé pour le cabinet de consultation gynécologique et proctologique

Avec Orbit, vous avez tout à votre disposition

Car ce concept d'agencement a été conçu en étroite coopération avec des gynécologues. Fonctionnalité, flexibilité et économie ont été mis au premier plan.

Orbit est mobile

9 modules mobiles au choix, indépendants les uns des autres, et qui se disposent pour s'adapter à votre besoin immédiat.

Commencer sans gros investissement

Le module de collecte du matériel usagé améliore nettement le fonctionnement au quotidien de votre cabinet.

Orbit résout le problème de la collecte du matériel usagé

Un module spécialement équipé assure la collecte sans problème des instruments et du matériel usagés.

Possibilité d'extension et d'adaptation

Il est possible à tout moment de compléter et de modifier la disposition des modules dans le cabinet de consultation. Les modules s'intègrent sans problème dans un cabinet déjà aménagé.

Tout à portée de main

Instruments et matériels sont accessibles facilement et en toute sécurité grâce à leur disposition précise. Mobilité assurée par des roulettes facilement dirigeables.

Qualité immédiatement

Les modules Orbit sont en tôle d'acier de haute qualité, avec isolation sonore. Extrêmement facile à entretenir, ils sont pourvus d'un revêtement thermolaqué et d'une surface à poli fin, résistant aux désinfectants. Résiste également extrêmement bien aux chocs, rayures, ainsi qu'aux U.V. et variations de température et d'humidité.

Couleurs illustrées

Orbit :

Corps aluminium blanc RAL 9006

Façades ivoire clair RAL 1015

Poignées rectangulaires beige sahara RAL 0607030

medi-matic® :

Rembourrage noisette 104

Revêtement thermolaqué blanc pur RAL 9010

Éléments en matière plastique gris argenté

Siège d'examen 222.1550.0 :

Rembourrage noisette 104





Orbit

Le concept d'agencement mobile avec
unité d'examens/soins et unité de collecte
du matériel usagé



Couleurs illustrées

Orbit :

Corps aluminium blanc RAL 9006
Façades orangé pastel RAL 2003
Poignées rectangulaires blanc pur RAL 9010
Éléments en matière plastique gris argenté

medi-matic® :

Rembourement mandarine 98
Revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006
Éléments en matière plastique gris argenté

Tabouret pivotant 222.2760.0 :
Rembourement mandarine 98

Figure en haut à droite :

Orbit module 426.5040.0
Corps aluminium blanc RAL 9006
Façades orangé pastel RAL 2003
Poignées rectangulaires blanc pur RAL 9010
Éléments en matière plastique gris argenté

Orbit module 426.0020.0

Corps aluminium blanc RAL 9006
Façades jaune colza RAL 1009050
Poignées semicirculaires vert feuillage RAL 1206050
Éléments en matière plastique gris argenté



2

Orbit



1-3
Ouverture électromotrisée par simple effleurement du panneau, fermeture mécanique, avec conteneur amovible de 12 l (pour 5 l de liquide) et crèpine en plastique.

4-5
Plaque chauffante intégrée pour le préchauffage de spéculums.

Réglage et surveillance de la température à l'écran, réglable jusqu'à 40 °C / 104 °F.





6
Enlèvement facile du tiroir sans outil.

7
Face avant facile à enlever pour un nettoyage aisé.

8
Tiroirs avec dispositif automatique de rentrée et amortissement Airmatic. Guidage fermé des tiroirs. Ouverture complète pour une utilisation et une hygiène optimales.

9
Le plateau des modules de soins dispose d'un rebord profilé sur 3 côtés.

10
Mobile grâce à 4 roulettes doubles $\varnothing=50\text{mm}$, antistatiques. Avec protection anti-chocs en matière synthétique sur tout le pourtour du module.

11
Poignées semicirculaires ou rectangulaires.

12
Module de collecte 427.0010.0
Ouverture électrique par capteur, partie supérieure amovible, conteneur amovible en plastique de 20 litres.



Couleurs illustrées

Orbit :

Orbit modules 426.5040.0 et 426.0020.0

Corps aluminium blanc RAL 9006

Façades vert feuillage RAL 1206050

Poignées semicirculaires vert citron RAL 1008060

arco :

Rembourrage limette 99

Revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006

Éléments en matière plastique gris argenté



Orbit

Modules de soins et de collecte, mobiles

Modèle no.

Désignation

426.0010.0



Module de soins

Dimensions : 625 x 760 x 530 mm (l x H x P)
 2 tiroirs type 6 D, 1 tiroir type 6 G.
 Possibilité d'installer un préchauffage 401.0401.0 (accessoire)
 dans les deux tiroirs type 6 D.

426.0020.0



Module de soins

Dimensions : 625 x 760 x 530 mm (l x H x P)
 4 tiroirs type 6 D.
 Possibilité d'installer un préchauffage 401.0401.0 (accessoire)
 dans les deux tiroirs type 6 D supérieurs.


426.0030.0



Module de soins

Dimensions : 625 x 760 x 530 mm (l x H x P)
 2 tiroirs type 6 B, 1 tiroir type 6 D,
 1 tiroir type 6 G.
 Possibilité d'installer un préchauffage 401.0401.0 (accessoire)
 dans le tiroir type 6 D.

426.0040.0

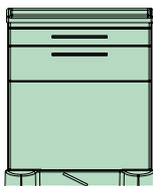

Module de soins et de collecte


Dimensions : 625 x 760 x 530 mm (l x H x P)
 1 tiroir type 6 B, 1 tiroir type 6 D,
 1 tiroir de collecte, ouverture électromotorisée
 par effleurement, fermeture mécanique,
 avec conteneur inox de 12 litres amovible (pour 5 litres de liquide),
 crépine en plastique pour récupérer env. 15 spéculums et conteneur de 8 litres en plastique,
 pédale de blocage central des roulettes.
 Possibilité d'installer un préchauffage 401.0401.0 (accessoire) dans le tiroir type 6 D.



Modèle no.

Désignation


426.5010.0

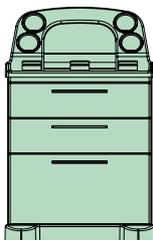

Module de soins

Dimensions : 625 x 995 x 530 mm (l x H x P)
avec capot supérieur plastique ABS* avec ouvertures, couleur gris argenté,
avec set de traitement pour le dépôt d'instruments, de médicaments, de matériel jetable etc.
2 tiroirs type 6 D, 1 tiroir type 6 G.
Possibilité d'installer un préchauffage 401.0401.0 (accessoire) dans les deux tiroirs type 6 D.


426.5020.0

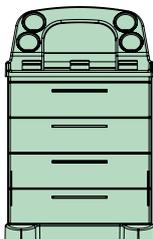

Module de soins

Dimensions : 625 x 995 x 530 mm (l x H x P)
avec capot supérieur plastique ABS* avec ouvertures, couleur gris argenté,
avec set de traitement pour le dépôt d'instruments, de médicaments, de matériel jetable etc.
4 tiroirs type 6 D.
Possibilité d'installer un préchauffage 401.0401.0 (accessoire) dans les deux tiroirs type 6 D supérieurs.

426.5030.0

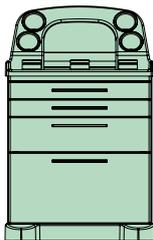

Module de soins

Dimensions : 625 x 995 x 530 mm (l x H x P)
avec capot supérieur plastique ABS* avec ouvertures, couleur gris argenté,
avec set de traitement pour le dépôt d'instruments, de médicaments, de matériel jetable etc.
2 tiroirs type 6 B, 1 tiroir type 6 D, 1 tiroir type 6 G.
Possibilité d'installer un préchauffage 401.0401.0 (accessoire) dans le tiroir type 6 D.


426.5040.0



Module de soins et de collecte

Dimensions : 625 x 995 x 530 mm (l x H x P)
avec capot supérieur plastique ABS* avec ouvertures, couleur gris argenté,
avec set de traitement pour le dépôt d'instruments, de médicaments, de matériel jetable etc.
1 tiroir type 6 B, 1 tiroir type 6 D, 1 tiroir de collecte,
ouverture électromotorisée par effleurement, fermeture mécanique,
avec conteneur inox de 12 litres amovible (pour 5 litres de liquide), crépine en plastique
pour récupérer env. 15 spéculums et conteneur de 8 litres en plastique, pédale de
blocage central des roulettes.
Possibilité d'installer un préchauffage 401.0401.0 (accessoire) dans le tiroir type 6 D.

427.0010.0

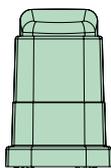

Module de collecte

Dimensions : 365 x 565 x 465 (l x H x P)
revêtement en ABS*, couleur gris argenté,
Couvercle en plastique, couleur noir, ouverture électrique par senseur,
partie supérieure amovible, conteneur amovible en plastique de 20 litres.

*ABS = Acrylonitrile Butadiène Styrene

Orbit

Accessoires pour modules de soins et de collecte

Modèle no.	Désignation	Modèle no.	Désignation	Modèle no.	Désignation
401.0401.0	Préchauffage CE/93/42/CEE pour tiroir type 6 D. Régulation et contrôle de la température par display, réglable jusqu'à max. 40 °C/104 °F, pour instruments (p.ex. spéculums). Tension de raccordement : 100 - 240 V, 50/60 Hz, puissance absorbée moyenne : 20 W, câble avec fiche de courant, env. 5 m de longueur.	401.0450.0	Couvercle 325 x 265 mm, en inox, sert à couvrir le conteneur inox à 12 litres pendant le transport (sans ill.)	401.0451.0	Couvercle 297 x 204 mm, en plastique, sert à couvrir le récipient à déchets de 18 ou 20 litres en matière plastique pendant le transport. (sans ill.)
401.0460.0	Crépine en inox, avec poignées, pour 5 litres de liquide, récupérer env. 15 spéculums, pour module de collecte 427.0010.0.	400.0505.0	Séparations de tiroir 498 x 376 x 55 mm (l x P x H), à deux voies, pour tiroir type 6 D, désassemblé, cadre en aluminium anodisé, comprenant 1 pc. séparateur longitudinal en SAN** et 2 pc. séparateurs transversaux en SAN**. (Ne pas possible d'utiliser avec un tiroir avec préchauffage 401.0401.0!)	400.0506.0	Séparations de tiroir 498 x 376 x 35 mm (l x P x H), à deux voies, pour tiroir type 6 B, désassemblé, cadre en aluminium anodisé, comprenant 1 pc. séparateur longitudinal en SAN** et 2 pc. séparateurs transversaux en SAN**.
400.0507.0	Séparations de tiroir 498 x 376 x 55 mm (l x P x H), à trois voies, pour tiroir type 6 D, désassemblé, cadre en aluminium anodisé, comprenant 2 pc. séparateurs longitudinaux en SAN**. (Ne pas possible d'utiliser avec un tiroir avec préchauffage 401.0401.0!)	400.0508.0	Séparations de tiroir 498 x 376 x 35 mm (l x P x H), à trois voies, pour tiroir type 6 B, désassemblé, cadre en aluminium anodisé, comprenant 2 pc. séparateurs longitudinaux en SAN**.		

****SAN** = styrène-acrylonitrile

Modules de soins et de collecte

Description des modèles et du matériau

Corps du meuble

Construction 'sandwich' autoporteuse de tôle d'acier galvanisée et phosphatée à double paroi, face arrière à paroi simple, avec isolation thermique et phonique, surfaces internes et externes lisses.

Façades de tiroirs

Panneau avant interchangeable en tôle d'acier galvanisée et phosphatée avec coins et bords arrondis, avec isolation thermique et phonique joint en silicone périphérique.

Tiroirs

Tiroir complètement en tôle d'acier galvanisée et phosphatée, thermolaqué aluminium blanc RAL 9006. Rails silencieux masqués avec ouverture complète, dispositif automatique de rentrée et amortissement Airmatic, retenue élevée, enlèvement du tiroir sans outils.

Charge maximale d'utilisation : 20 kg.
Dimensions intérieures des tiroirs (Dimensions utiles l x H x P)
type 6 B 504 x 51 x 381 mm
type 6 D 504 x 126 x 381 mm
type 6 G 504 x 276 x 381 mm

Poignées

Poignées semicirculaires ou rectangulaires en zinc moulé sous pression, distance des trous 192 mm.

La surface est résistante aux produits chimiques, facile à nettoyer et à désinfecter. Poignées chromées mat ou avec revêtement par poudre en polyester selon la couleur de la face avant ou individuellement selon nuancier.

Roulettes

Modules avec 4 roulettes doubles Ø 50 mm, antistatiques.
Revêtement du châssis en ABS, couleur gris argenté.

Plan de travail

Plan de travail lisse en ABS, couleur gris argenté, résistant aux rayures et aux désinfectants, bord profilé de 3 côtés, contreface scellée.

Laquage

Revêtement de poudre de polyester de haute qualité, surface brillante, extrêmement résistant aux coups et aux rayures, facile à nettoyer, résistant aux désinfectants et aux influences climatiques.

Revêtement standard des corps du meuble : blanc gris RAL 9002 ou aluminium blanc RAL 9006 ou aluminium gris RAL 9007.

Revêtement des corps de meuble selon nuancier en page 56. moyennant supplément, N° art. 401.0801.0.

Les façades de tiroir et les poignées sont disponibles sans supplément dans toutes les couleurs selon nuancier, page 56.

Autres couleurs RAL sur demande.

Notes de commande :

Les indications suivantes sont nécessaires :

Plan de travail pour module : gris argenté

Corps du meuble : RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007 (de série) ou selon nuancier moyennant supplément.

Faces avant de meubles : selon nuancier

Poignées semicirculaires : selon nuancier ou chromées mates
Poignées rectangulaires : selon nuancier ou chromées mates

Modèles de planification




Couleurs illustrées

arco :
Rembourrage limette 99
Revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006
Éléments en matière plastique gris argenté


Siège d'examen :
Rembourrage limette 99

Orbit :
Corps aluminium blanc RAL 9006
Façades vert feuillage RAL 1206050
Poignées semicirculaires vert citron RAL 1008060
Éléments en matière plastique gris argenté



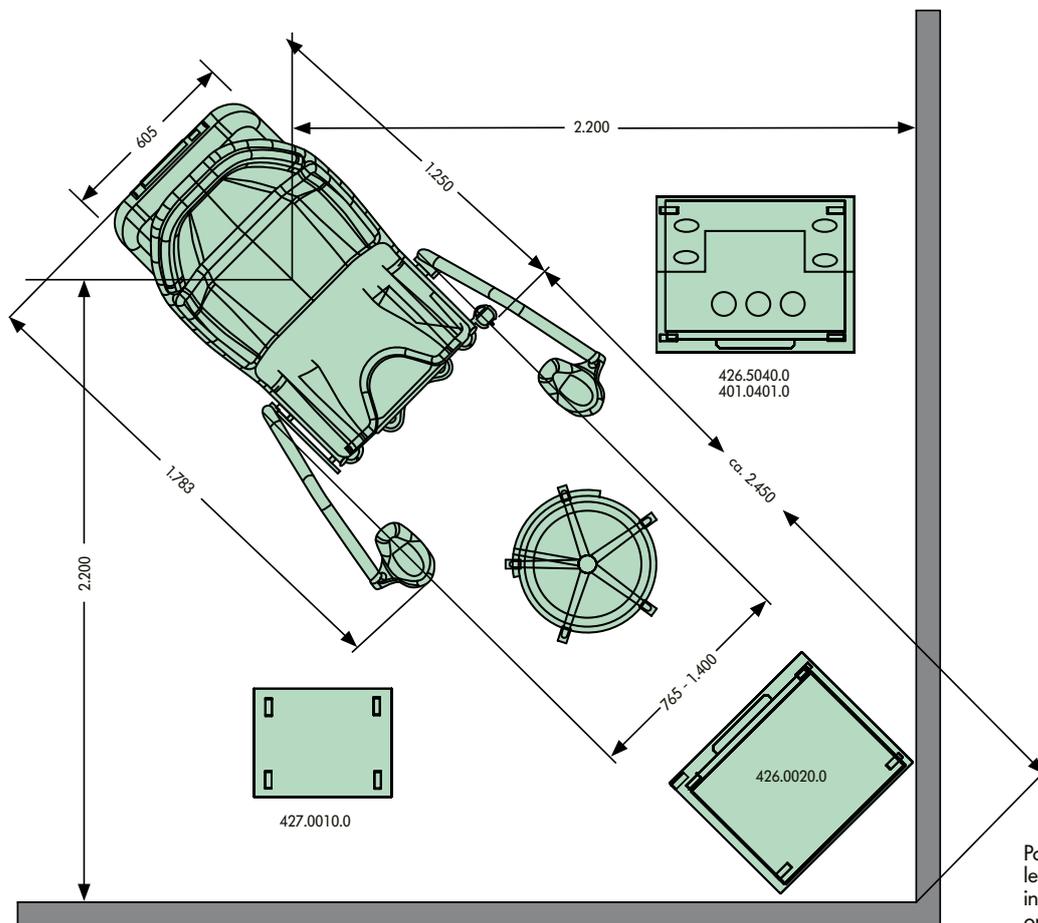

Pour les fauteuils avec raccordement au sol, le câble doit être dans l'emplacement pour installation (1.135 x 605 mm). Dans cette zone, on peut positionner le fauteuil suivant ses besoins.

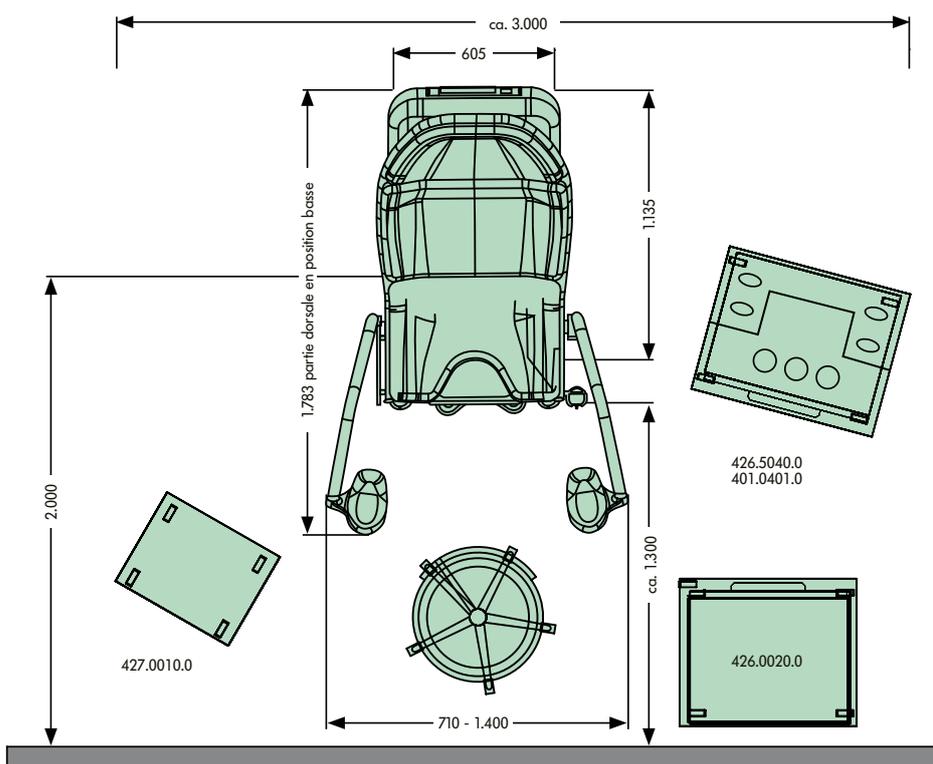

Couleurs pour la couche de laque, revêtements en similicuir et matières plastiques


Couche de laque



blanc gris RAL 9002



jaune colza RAL 1009050*

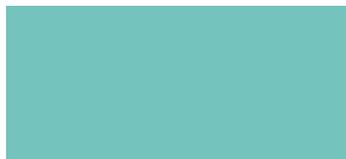

vert clair RAL 6027




blanc pur RAL 9010



jaune de sécurité RAL 1003



vert citron RAL 1008060*



gris albâtre RAL 0007500*



orangé pastel RAL 2003



vert feuillage RAL 1206050*



gris clair RAL 7035



ivoire clair RAL 1015



bleu blanc RAL 2408015*



gris anthracite RAL 7016



beige sahara RAL 0607030*



bleu clair RAL 2606030*




noir foncé RAL 9005



vieux rose RAL 3014



bleu saphir RAL 5003



aluminium blanc RAL 9006



violet bruyère RAL 4003



aluminium gris RAL 9007



orangé sang RAL 2002



Poignées de tiroirs aussi disponibles chromées mates.

Vous disposez d'un grand nombre de possibilités pour agencer votre aménagement – intérieur selon vos goûts. Car nous vous proposons plus de 40 couleurs ainsi que de multiples combinaisons permettant de réaliser tous les souhaits.

Neutre ou gai, classique ou moderne, élégant ou extravagant, il vous faudra peu de temps pour trouver à coup sûr le coloris qui convient, parmi tous ceux que nous vous proposons.

Choisissez un coloris qui aura un effet positif sur vos patients. Nous vous recommandons par exemple un jaune tonique, un bleu apaisant ou un vert relaxant.

Pour des combinaisons de couleurs, vous avez à votre disposition le configurateur de couleurs en ligne sur notre site internet : www.schmitz-soehne.com

Contactez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller

* Nuances RAL

Similicuir confort



blanc fleurs 84



jaune or 86



mandarine 98




carmin 92



rouge framboise 103



bleu caraïbes 82

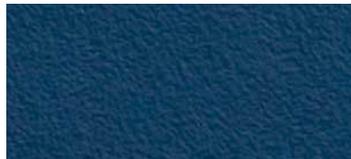

bleu atlantique 83




topaze 105



vert opaline 100



vert pomme 94

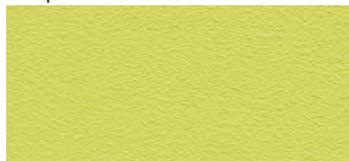

limette 99



café au lait 102



marron naturel 93



noisette 104



beige sable 101



gris pierre 96




gris ardoise 97



gris titane 91

Similicuir classic

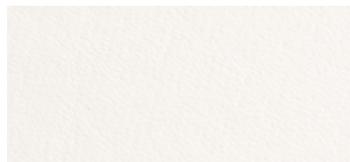


blanc 53



gris argenté 55



océan 52

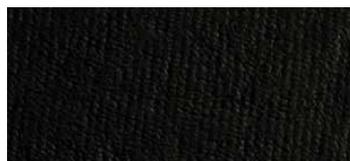

noir 57

Matière plastique



gris argenté

Nous vous recommandons :
Produit de nettoyage spécial
pour similicuir
Référence 2019878

Vaporisateur de 500 ml (vendus par 3)

Set de nettoyage pour similicuir
Référence 2026973

1 x vaporisateur de 500 ml et 1 brosse

Vous trouverez toutes les informations concernant le nettoyage et la désinfection des rembourrages dans le mode d'emploi spécifique.

Configurateur de couleurs en ligne : Optez pour la couleur de votre choix

medi-matic® 115 – Fauteuils d'examen et de traitement pour la gynécologie et l'urologie




Couleurs sélectionnées :

Couche de laque :
blanc pur RAL 9010
Rembourrage :
topaze 105
Éléments en matière plastique :
gris argenté

S'il vous plaît noter : Selon votre moniteur et son niveau de résolution et type de carte vidéo,
les couleurs représentées par le configurateur de couleurs peuvent s'écarter des couleurs véritables.
Nous ne pouvons donc pas assumer la responsabilité quant à leur exactitude.
Modèle illustré : 115.7550.1 avec les supports de pieds modèle no. 101.4420.1.

Couche de laque

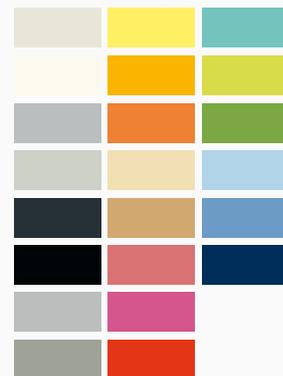

Similicuir confort



Similicuir classic



Voyez le monde en couleurs

Grâce au configurateur de couleurs en ligne de SCHMITZ, testez les différentes combinaisons de couleurs et prenez le temps d'y réfléchir.

Associez à votre guise les 22 teintes de coussin et de peinture pour créer différentes ambiances dans vos salles d'examen.

Froide ou vive, classique ou moderne, élégante ou extravagante, chez nous, vous trouverez rapidement la couleur qui vous convient.

Laissez-vous inspirer :
www.schmitz-soehne.com

arco – Fauteuils d'examen et de traitement
pour la gynécologie



Couleurs sélectionnées :
Couche de laque :
aluminium blanc RAL 9006
Rembourrage :
rouge framboise 103
Éléments en matière plastique :
gris argenté

S'il vous plaît noter : Selon votre moniteur et son niveau de résolution et type de carte vidéo, les couleurs représentées par le configurateur de couleurs peuvent s'écarter des couleurs véritables. Nous ne pouvons donc pas assumer la responsabilité quant à leur exactitude.
Modèle illustré : 114.8700.0 avec les supports de pieds 101.0456.0, les housses en similicuir 101.0473.0, la cuvette avec support de confort 101.0495.0 et le cache coloré 101.0488.0.

Couche de laque



Similicuir confort



Similicuir classic



**SCHMITZ u. Söhne
GmbH & Co. KG**

B. P. 14 61
58734 Wickede (Ruhr)
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)
Allemagne
tél. +49 (0)2377 84 0
télé. +49 (0)2377 84 135
www.schmitz-soehne.com
export@schmitz-soehne.de

Pour ces produits et leurs accessoires, qui sont caractérisés par le marquage « CE », les prescriptions de la loi MPG (sur les dispositifs médicaux) et les directives CE, no. 93/42/CEE ont été prises en considération.



Les produits doivent uniquement être utilisés pour l'usage prévu. SVP, reportez-vous également à notre mode d'emploi!

SCHMITZ en France :

SCHMITZ SAS
Espace 23
23, rue des Granges Galand
37550 Saint Avertin, France
tél. +33 (0) 247 20 96 01
cell +33 (0)6 25 33 19 09
www.schmitz-soehne.com
info@schmitz-soehne.fr

SCHMITZ en Suisse :

SCHMITZ AG
Caroline Meynis de Paulin
Bahnhofplatz 2
3284 Fräschels, Schweiz
tél. +41 (0)31 75565 88
télé. +41 (0)31 75565 89
cell +41 (0)79 1376590
info@schmitz-suisse.ch

**Visitez notre site internet
pour plus d'informations
concernant nos agences
à l'étranger.**



[f/schmitz.soehne](https://www.facebook.com/schmitz.soehne)

