



varimed®  
Mobilier d'examen  
et de traitement



varimed®

Divans d'examen, chariots médi-net,  
tabourets d'examen –  
irremplaçables au quotidien

Revêtement en  
similicuir, résistant.

Matelas à  
tous coins arrondis  
et renforcés –  
sans couture.

Tous les divans sont équipés  
de pièces d'écartement qui se trouvent  
entre le rembourrage et le châssis –  
sans risque de coincer les doigts!

Pieds de mise  
à niveau.

Hauteur réglable  
facilement et  
rapidement par le  
vérin à gaz comprimé  
'anatomic-Lift'

Roulettes de freinage  
doubles en matière  
plastique qui n'en-  
crassent pas le sol.

Couleurs :  
rembourrage mandarine 98  
châssis thermolaqué aluminium gris RAL 9007



2 crémaillères en acier –  
une exécution robuste pour  
une longue durée de vie.

Châssis en tube  
d'acier de  
construction stable,  
40 x 20 mm,  
pieds 30 x 30 mm.

Chariot médi-net avec guidage  
de tiroir par roulements à billes,  
rails de précision silencieux;  
capacité de charge élevée

Châssis en tube d'acier,  
stable, 20 x 20 mm.

Revêtement thermolaqué de  
haute qualité, résistant bien  
aux chocs et aux rayures.

Roulettes doubles en  
matière plastique qui  
n'encrassent pas le sol.



# varimed® Divans

Divans d'examen 211.1180.0 et 211.1190.0



Couleurs :  
211.1180.0  
rembourrage topaze 105, châssis thermolaqué blanc gris RAL 9002


211.1190.0  
rembourrage limette 99, châssis chromé

Divan d'examen 211.1080.0



Couleurs :  
rembourrage mandarine 98  
châssis thermolaqué aluminium gris RAL 9007

Divan d'examen, pour ECG 211.1310.0

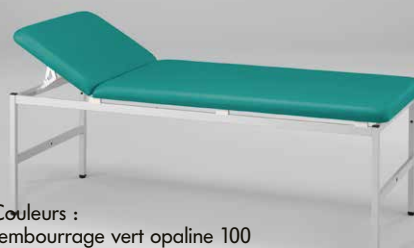

Couleurs :  
rembourrage vert opaline 100  
châssis thermolaqué aluminium blanc RAL 9006

Divan pour patient obèse 211.1330.0




Couleurs :  
rembourrage bleu caraïbes 82  
châssis chromé

**Tous les divans sont équipés de pièces d'écartement qui se trouvent entre le matelas et le châssis.**

Modèle no.

Désignation


**211.1080.0**

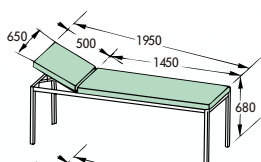

**Divan d'examen C€**

châssis en tube d'acier de section carrée, revêtement thermolaqué RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007, matelas de 50 mm, en deux parties, vis de niveau, appui-tête réglable jusqu'à +40°  
Charge maximale d'utilisation : 225 kg

**211.1180.0**

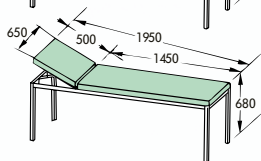

**Divan d'examen C€**

châssis en tube d'acier de section carrée, revêtement thermolaqué RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007, matelas de 70 mm, en deux parties, vis de niveau, appui-tête réglable jusqu'à +40°  
Charge maximale d'utilisation : 225 kg

**211.1190.0**

**Divan d'examen C€**

pieds chromés, pour le reste, comme 211.1180.0

**200.0970.0**



**Accessoires :**

**Porte-rouleau de papier** pour rouleaux de 500 mm de large

**Rouleau de papier**, 500 mm de large

**Revêtement différent pour châssis**

selon notre nuancier, pour 211.1080.0 et 211.1180.0

**Supplément** pour appui-tête avec fente nasale (pour les modèles 211.1180.0 et 211.1190.0)

**Bouchon pour la fente nasale**

**200.1030.0**




**200.6500.0**

**200.4380.0**

**200.4390.0**

**211.1310.0**

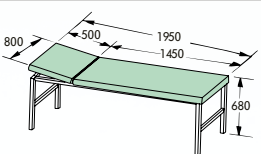

**Divan d'examen, pour ECG C€**

largeur 800 mm, châssis en tube d'acier de section carrée, avec entretoise transversale, revêtement thermolaqué RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007, matelas de 70 mm, en deux pièces, vis de niveau, appui-tête réglable jusqu'à +40°. Charge maximale d'utilisation : 225 kg

**211.1320.0**

**Divan d'examen, pour ECG C€**

châssis en tube d'acier chromé de section carrée, pour le reste, comme 211.1310.0

**200.0940.0**



**Accessoires :**

**Porte-rouleau de papier** pour divans de 800 mm de large

**Rouleau de papier**, 500 mm de large

**Entretoise longitudinale**, additionnelle, revêtement thermolaqué RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007 pour 211.1310.0

**Entretoise longitudinale**, additionnelle, chromée, pour 211.1320.0

**Entretoise longitudinale**, additionnelle, revêtement thermolaqué selon notre nuancier

**Revêtement différent pour châssis** selon notre nuancier, pour 211.1310.0

**200.1030.0**


**200.5100.0**

**200.5110.0**

**200.5120.0**

**200.6500.0**

**211.1330.0**

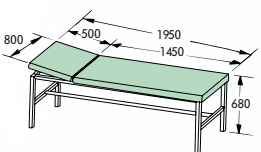

**Divan pour patient obèse C€**

largeur 800 mm, châssis en tube d'acier chromé, avec entretoise transversale et longitudinale, vis de niveau, matelas de 70 mm, en deux parties, appui-tête réglable jusqu'à +40°  
Charge maximale d'utilisation : 300 kg. Mobilité et dimensions spéciales non disponibles!

**200.0940.0**

**Accessoires :**

**Porte-rouleau de papier** pour divans 800 mm de large

**Rouleau de papier**, 500 mm de large

**200.1030.0**

**200.0000.0**

**200.0010.0**

**Majoration de prix pour divans spéciaux, modèles 211.1180.0 – 211.1320.0**

Hauteur spéciale jusqu'à max. 830 mm (à partir de 700 mm avec entretoise transversale et longitudinale)

Mobilité, 4 roulettes, 125 mm de diam., dont 2 avec blocage total, antistatiques, et 1 roulette directionnelle, avec disques de protection de mur, 150 mm de diam., entretoise pour la stabilité. Toutes les roulettes n'encrassent pas le sol. SVP, nous préciser la hauteur totale désirée du divan à la commande.

Largeur spéciale, +/- 150 mm (largeur max. 900 mm)

Longueur spéciale, +/- 150 mm

**200.0020.0**

**200.0030.0**

Pour les divans d'une largeur ET longueur spéciale, le supplément ne s'applique qu'une fois!

**Note :**

Nous recommandons d'utiliser les divans avec entretoise transversale et longitudinale pour l'orthopédie et pour les massages.

**4 coloris pour le rembourrage dans la qualité classic (sans supplément).**

**18 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément 200.8510.0/200.8520.0).**

**SVP, voir les pages 18/19.**

**Revêtement standard du châssis RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007.**

**SVP, indiquez la couleur souhaitée lors de votre commande.**

# varimed®

## Divans d'examen mobiles

## Divans de réveil mobiles

Divan d'examen et de massages 211.9351.0



Couleurs :  
rembourrage blanc fleurs 84  
châssis chromé

Divan de réveil 211.9501.0  
1 Panier de réception 200.5500.0




Couleurs :  
rembourrage bleu caraïbes 82  
châssis chromé

**Tous les divans sont équipés de pièces d'écartement qui se trouvent entre le matelas et le châssis.**

Modèle no.

Désignation

**211.9301.0**

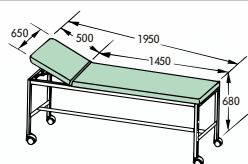


**Divan d'examen et de massages C€**

châssis en tube d'acier de section carrée, revêtement thermolaqué RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007, avec entretoise transversale et longitudinale, mais avec 4 roulettes 125 mm de diam., dont 2 avec blocage total, antistatiques, et 1 roulette directionnelle, avec disques de protection de mur 150 mm de diam., hauteur du divan 680 mm.

Matelas de 70 mm, en deux parties, appui-tête réglable jusqu'à +40°,

Charge maximale d'utilisation : 225 kg


**211.9351.0**

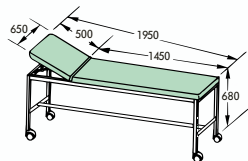

**Divan d'examen et de massages C€**

châssis chromé, pour le reste, comme 211.9301.0.

**211.9501.0**

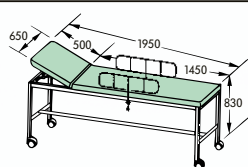

**Divan de réveil C€**

châssis en tube d'acier chromé de section carrée, avec entretoise transversale et longitudinale.

Mobile sur 4 roulettes, 125 mm de diam., dont 2 avec blocage total, antistatiques,


1 roulette directionnelle, avec disques de protection de mur, 150 mm de diam.

Matelas de 70 mm, en deux parties, appui-tête réglable jusqu'à +40°.

Avec 2 barres latérales et pièces de fixation, chromées, à déplacement vers le bas du matelas.

Charge maximale d'utilisation : 225 kg

**211.9511.0**

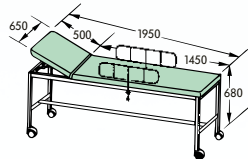

**Divan de réveil C€**

châssis chromé, hauteur du divan 680 mm, pour le reste, comme 211.9501.0.

#### Accessoires

pour divans 211.9301.0 – 211.9511.0

**200.0970.0**



**Porte-rouleau de papier**

pour rouleaux de 500 mm de large.


**200.1030.0**



**Rouleau de papier**

500 mm de large.

**200.4900.0**

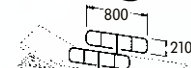


**1 barre latérale et 1 rail latéral**

chromés, avec étau, pour divans en tube d'acier de section carrée,

peut être abaissée jusqu'au niveau du rembourrage **et déplacée horizontalement sur le rail.**

**200.4950.0**

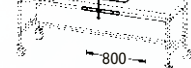


**1 barre latérale avec clameau de fixation**

chromés, pour divans en tube d'acier de section carrée, peut être abaissée


jusqu'au niveau du rembourrage, **clameaux fixés en permanence au châssis du divan d'examen.**

**200.0020.0**

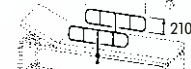

**Largeur spéciale de 800 mm** (pour 211.9301.0 à 211.9511.0)


**200.5500.0**

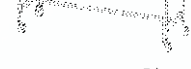

**Panier de réception**

à accrocher aux entretoises transversales ou longitudinales, panier : 520 x 490 x 140 mm, en acier inox.

**200.6500.0**

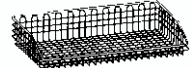

**Revêtement du châssis selon nuancier**

pour 211.9301.0, supplément.

Toutes les roulettes ne n'encrassent pas le sol.

**4 coloris pour le rembourrage dans la qualité classic (sans supplément).**

**18 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément 200.8520.0).**

**SVP, voir les pages 18/19.**

**Revêtement standard du châssis RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007.**

**SVP, indiquez la couleur souhaitée lors de votre commande.**



Ce produit est disponible et décrit dans le catalogue no. 81 à la page 4.

# varimed®

## Divans d'examen et de traitement à hauteur réglable



- Travail ergonomique grâce à l'étendue de réglage en hauteur
- Pas de déport du plateau lors du réglage en hauteur
- Le châssis moulé laisse suffisamment d'espace pour les jambes




#### Désignation

#### Divan d'examen et de traitement € 211.4100.0

réglage hydraulique en hauteur de 500 à 920 mm par pédale. Réglage du repose-tête par vérin à gaz de -20° à +40°. Matelas de 70 mm, en deux parties, revêtement en similicuir selon le nuancier SCHMITZ. Revêtement du cadre thermolaqué en aluminium blanc RAL 9006, aluminium gris RAL 9007 ou blanc gris RAL 9002. Revêtement du châssis en matière plastique, gris argenté. Avec 4 pieds de niveau. Charge maximale d'utilisation : 225 kg

#### Divan d'examen et de traitement € 211.4110.0

comme 211.4100.0, mais largeur 800 mm.

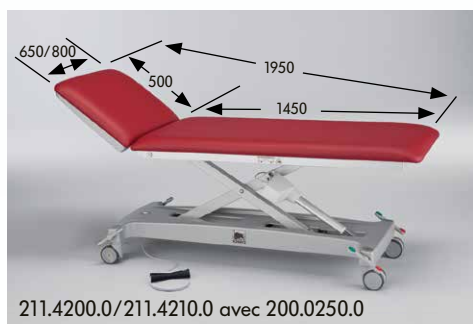

#### Divan d'examen et de traitement € 211.4200.0

réglage électrique en hauteur de 500 à 920 mm par commande au pied, interrupteur de coupure pour l'activation/désactivation de l'élément de commande, câble d'alimentation de 2.40 m avec prise, pour le reste, comme 211.4100.0. Sur demande, avec commande manuelle au lieu de la commande au pied.

#### Divan d'examen et de traitement € 211.4210.0

comme 211.4200.0, mais largeur 800 mm.



1

#### Interrupteur de coupure

pour l'activation/désactivation de l'élément de commande.

#### Accessoires :

2

**Mobilité 200.0250.0** 4 roulettes fermées doubles Ø 100 mm, dont 2 antistatiques, blocage central par axe, 1 roulette avec blocage directionnel. (La plage de réglage de la hauteur demeure identique.)

#### Mobilité pour équipement ultérieur 211.9940.0

pour installation au divan existant de 650 mm de large. (sans ill.)

#### Mobilité pour équipement ultérieur 211.9940.1

pour installation au divan existant de 800 mm de large. (sans ill.)

3

**Paire de barrières latérales 200.0400.0** longueur : 990 mm, peuvent être rabattues sous le niveau du matelas, revêtement thermolaqué RAL 9006 aluminium blanc.

4

**Support pour la commande au pied 200.0350.0** pour les divans d'examen et de traitement 211.4200.0 et 211.4210.0, en acier, revêtement thermolaqué RAL 9006 aluminium blanc, montage du côté long du divan (réalisable a posteriori).

**Support de rouleau de papier 200.0930.0** pour rouleau de papier de 590 mm de large.

**Rouleau de papier 200.1030.0** 500 mm de large.

**Protection des bords 200.0410.0** de matière plastique, gris, montée des quatre coins du matelas (sans ill.)

**Tête avec fente nasale, supplément 200.0500.0** (sans ill.)

**Coussin amovible pour la fente nasale 200.0510.0** (sans ill.)

**Rail latéral (pièce) 200.4402.0** pour les divans 211.4100.0, 211.4110.0, 211.4200.0 et 211.4210.0, montage du côté gauche ou droit, 25 x 10 x 750 mm, charge max. 30 kg, pas de montage en combinaison avec les barrières latérales 200.0400.0. (sans ill.)

**Blindage électrocardiogramme 200.0251.0** avec fiche de compensation de potentiel à gauche et à droite ainsi que plaque de blindage destinée à réduire les perturbations, compatible avec les divans de 650 mm de largeur. (sans ill.)

**Blindage électrocardiogramme 200.0252.0** pour divans de 800 mm de largeur, pour le reste, comme 200.0251.0. (sans ill.)

**Supplément 200.6530.0** pour un coloris du châssis au choix selon notre nuancier.

**4 coloris pour le rembourrage dans la qualité classic (sans supplément).**  
**18 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément 200.8520.0).**  
**SVP, voir les pages 18/19.**

**Revêtement standard du châssis RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007.**  
**SVP, indiquez la couleur souhaitée lors de votre commande.**



4

# varimed®

## Divans universels d'examen et de traitement



### Désignation

#### **Divan d'examen universel C€ 211.4300.0**

réglage électrique en hauteur de 500 à 920 mm par commande au pied, interrupteur de coupure pour l'activation/désactivation de l'élément de commande. Partie médiane utilisable comme dossier, appui-tête et siège réglables manuellement jusqu'à 35°, cuvette en acier inox, clameaux de fixation pour appui-jambes. Matelas de 70 mm avec rembourrage en similicuir selon nuancier SCHMITZ. Châssis thermolaqué en aluminium blanc RAL 9006, aluminium gris RAL 9007 ou blanc gris RAL 9002. Revêtement du châssis en matière plastique, gris argenté. Avec 4 pieds de niveau, non antistatiques. Câble de raccordement de 2,40 m avec fiche secteur. Sur demande, avec commande manuelle au lieu de la commande au pied. Charge maximale d'utilisation :  
 en position horizontale pour examens généraux : 225 kg  
 en position gynécologique : 135 kg  
 Sur demande, le divan est disponible avec roulettes, référence 200.0250.0.  
 Des dimensions spéciales ne sont pas disponibles.

1 **Interrupteur de coupure** pour l'activation/désactivation de l'élément de commande.

2

#### **Support de rouleau de papier 200.0930.0**

pour rouleau de papier de 590 mm de large.

#### **Rouleau de papier 200.1030.0**

500 mm de large. (sans ill.)

3

#### **Rail latéral (pièce) 200.4401.0**

pour montage du côté tête, 25 x 10 x 480 mm.





## Désignation

### 4 **Statif à perfusion 200.4600.0**

en acier inox, 4 crochets, dispositif de fixation aux glissières et réglage à l'articulation sphérique, portée de réglage 410 mm, pour un montage au rail latéral 200.4401.0.  
Charge maximale d'utilisation par crochet : 2 kg

### 5 **Mobilité 200.0250.0**

4 roulettes fermées doubles Ø 100 mm, dont 2 antistatiques, blocage central par axe, 1 roulette avec blocage directionnel. (La plage de réglage de la hauteur demeure identique.)

### **Mobilité pour équipement ultérieur 211.9940.0**

pour installation au divan existant de 650 mm de large. (sans ill.)

### 6 **Appui-jambe (pièce) 202.2270.0**

de Goepel, en mousse intégrale, gris argenté, avec courroie de fixation, tige en acier inox 18/10.

### 7 **Appui-bras 202.1070.0**

plateau en matière plastique, rembourrage de mousse intégrale, antistatique, avec sangle de serrage, avec fixation à glissière en acier inoxydable, peut pivoter sur 180° par commande à un seul levier et réglable horizontalement et verticalement, largeur 150 mm, longueur 600 mm.  
À poser sur le rail latéral 200.4401.0 (non inclus).

### 8 **Support pour la commande au pied 200.0350.0**

en acier, revêtement thermolaqué RAL 9006 aluminium blanc, montage du côté long du divan (réalisable a posteriori).

### **Supplément 200.6540.0**

pour un coloris du châssis au choix selon notre nuancier.

**4 coloris pour le rembourrage dans la qualité classic (sans supplément).**  
**18 coloris dans la qualité confort (moyennant supplément 200.8520.0).**  
**SVP, voir les pages 18/19.**

**Revêtement standard du châssis RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007.**  
**SVP, indiquez la couleur souhaitée lors de votre commande.**

# varimed®

## Tabourets pivotants, Sièges pour examen, mobilier médical



| Modèle no.            | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>222.2810.0</b><br> | <b>Tabouret pivotant</b><br>pied à 5 branches en matière plastique noir, colonne chromée, avec roulettes doubles pour sols lisses/durs, avec frein de sécurité, réglable en hauteur par pompe à gaz ANATOMIC-LIFT, commande à main, siège rembourré avec similicuir.<br>Sur demande : roulettes doubles pour sols recouverts de moquette.<br>Charge maximale d'utilisation : 135 kg                |
| <b>200.8000.0</b>     | <b>Supplément</b><br>pour couleurs spéciales du châssis selon notre nuancier, colonne chromée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>222.2760.0</b><br> | <b>Tabouret pivotant</b><br>siège rembourré, pied à 5 branches en aluminium poli, avec roulettes doubles pour sols lisses/durs, avec frein de sécurité, réglable en hauteur par pompe à gaz ANATOMIC-LIFT, commande à main.<br>Sur demande : roulettes doubles pour sols recouverts de moquette.<br>Charge maximale d'utilisation : 135 kg                                                         |
| <b>222.1550.0</b><br> | <b>Siège pour examens</b><br>siège spécial rembourré recouvert de similicuir selon notre nuancier, réglable en hauteur par vérin à gaz comprimé de 490 à 690 mm, commande au pied.<br>Pied à 5 branches, revêtement thermolaqué RAL 9007 aluminium gris, avec roulettes doubles Ø 50 mm pour sols lisses/durs, pare-choc noir périphérique.<br>Charge maximale d'utilisation : 135 kg              |
| <b>222.1570.0</b><br> | <b>Siège pour examens</b><br>siège spécial et dossier rembourrés recouverts de similicuir selon notre nuancier, réglable en hauteur par vérin à gaz comprimé de 490 à 690 mm, commande au pied.<br>Pied à 5 branches, revêtement thermolaqué RAL 9007 aluminium gris, avec roulettes doubles Ø 50 mm pour sols lisses/durs, pare-choc noir périphérique.<br>Charge maximale d'utilisation : 135 kg |
| <b>200.0011.0</b>     | <b>Supplément de prix</b><br>pour roulettes freinées, freinées en charge, sinon déplacement libre<br>pour sièges pour examen 222.1550.0 et 222.1570.0.                                                                                                                                                                                                                                             |

**4 coloris pour le rembourrage dans la qualité classic (sans supplément).**  
**18 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément 200.8530.0 pour tabourets 222.2810.0 et 222.2760.0/200.8540.0 pour siège pour examens 222.1550.0/200.8550.0 pour siège pour examens 222.1570.0).**  
**SVP, voir les pages 18/19.**

221.1860.0



Rembourrage classic gris argenté 55

Modèle no.


Désignation

**221.1860.0**

**Chaise d'examen et de prise de sang C€**

châssis en tube d'acier de section carrée, thermolaqué en blanc gris RAL 9002, aluminium blanc RAL 9006 ou en aluminium gris RAL 9007. Siège, dossier et accoudoirs rembourrés avec similicuir „classic" noir 57. Charge maximale d'utilisation : 225 kg

**200.6610.0**

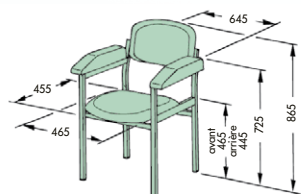


**Supplément**

pour un revêtement différent du châssis selon notre nuancier.

**3 autres coloris pour le rembourrage dans la qualité classic (moyennant supplément 200.8500.0). 18 coloris dans la qualité confort (moyennant supplément 200.8560.0). SVP, voir les pages 18/19.**

**Revêtement standard du châssis RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007. SVP, indiquez la couleur souhaitée lors de votre commande.**

**242.2350.0**

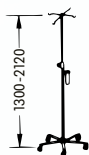

**Tige à perfusion C€/93/42/CEE**

châssis en acier inox 18/10, désassemblé, pied à 5 branches, avec roulettes doubles en matière plastique de 50 mm de diam., antistatiques, inoxydables, partie supérieure avec 4 crochets, cylindre en verre, réglable en hauteur d'une seule main de 1300 à 2120 mm. Charge maximale d'utilisation par crochet : 2 kg.

242.2350.0



# varimed®

## Chariots médi-net multi-usages

## Chariots médi-net pour appareils

Chariot médi-net pour appareils 233.6060.0,  
châssis en aluminium gris RAL 9007



Chariot multi-usages médi-net 233.6010.0  
Chariot multi-usages médi-net 233.7010.0,  
châssis en blanc gris RAL 9002



Désignation

Modèle no.


### Chariot médi-net pour appareils

châssis en tube d'acier de section carrée, démontable, thermolaqué en couleur blanc gris RAL 9002, aluminium blanc RAL 9006 ou en aluminium gris RAL 9007, tiroir sur rails de précision zingués (noir) préassemblés avec roulements à billes, plateaux et façade de tiroir plastifiés par laminage, blanc perle 60.

Poignée de tiroir en couleur blanc gris RAL 9002, aluminium blanc RAL 9006 ou en aluminium gris RAL 9007, 4 doubles roulettes de 75 mm de diamètre

**L'équipement de tiroirs supplémentaires n'est pas possible pour le modèle 233.6060.0.**

**233.6060.0**

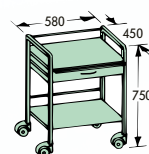

Châssis thermolaqué,  
1 tiroir, hauteur 750 mm

Désignation

Modèle no.

### Chariot multi-usages médi-net

châssis en tube d'acier de section carrée, démontable, chromé ou thermolaqué en couleur blanc gris RAL 9002, aluminium blanc RAL 9006 ou en aluminium gris RAL 9007, tiroir sur rails de précision zingués (noir) préassemblés avec roulements à billes, plateaux et façade de tiroir plastifiés par laminage, blanc perle 60. Poignée de tiroir en couleur blanc gris RAL 9002, aluminium blanc RAL 9006 ou en aluminium gris RAL 9007, 4 doubles roulettes de 75 mm de diamètre.

**Les médi-nets 233.6010.0/233.7010.0 peuvent être équipés de 2 tiroirs supplémentaires au maximum!**

**Les médi-nets 233.6110.0/233.7110.0 peuvent être équipés de 3 tiroirs supplémentaires au maximum!**

**Revêtement standard du châssis RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007. SVP, indiquez la couleur souhaitée lors de votre commande.**

### Charge maximale d'utilisation

**pour les médi-nets :**


**au total : jusqu'à 50 kg**

**tiroir : jusqu'à 10 kg**

**plateaux (supérieur/inférieur) : jusqu'à 20 kg**

**233.6010.0**

**233.7010.0**

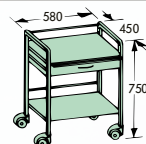


Châssis chromé,  
1 tiroir, hauteur 750 mm

Châssis thermolaqué,  
1 tiroir, hauteur 750 mm

**233.6110.0**

**233.7110.0**

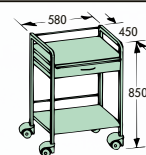

Châssis chromé,  
1 tiroir, hauteur 850 mm

Châssis thermolaqué,  
1 tiroir, hauteur 850 mm

**201.3000.0**

1 Tiroir supplémentaire,  
avec poignée

### Supplément :

**200.6600.0**

**200.6650.0**

pour châssis thermolaqué d'une autre couleur selon notre nuancier (à l'exception de no. 233.6060.0)  
pour poignée thermolaquée d'une autre couleur selon notre nuancier (à l'exception de no. 233.6060.0)

# varimed®

## Accessoires pour chariots médi-net multi-usage et porte-appareils

Chariot médi-net 233.6010.0  
avec accessoires pour injections  
201.1170.0, 201.1610.0, 201.1700.0, 201.2600.0



Chariot médi-net 233.6010.0  
avec accessoires pour postes de  
mesure ergométrique 201.1300.0  
(sans appareils)



Chariot médi-net 233.7010.0 + 201.0050.0 avec  
accessoires pour la dialyse à domicile 201.1800.0,  
201.1250.0 (sans appareil)



Distributeur pour matériel d'injection 201.1610.0



Console en acier inox 201.1800.0



Statif à perfusion  
avec 4 crochets  
201.1250.0



Distributeur pour matériel d'injection 201.1650.0



Ouvre-ampoules CUPFIX  
201.2600.0




Set «Médi-Müll» 201.2700.0




Porte-sac à déchets 201.2800.0















Cuvette ronde en acier inox 201.1170.0

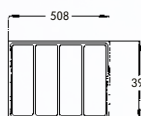

**Jeu de séparations pour  
tiroirs 201.2110.0** en plastique

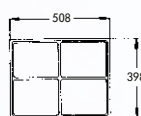


**Jeu de séparations pour  
tiroirs 201.2100.0** en plastique
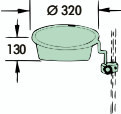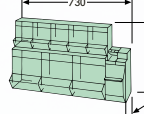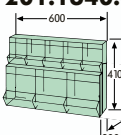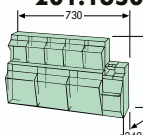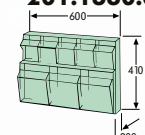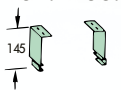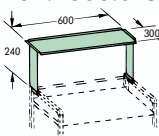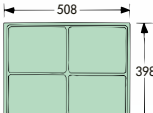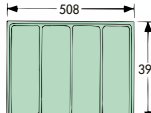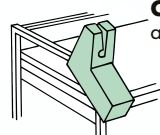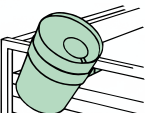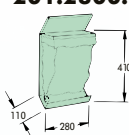
| Modèle no.        | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                               | Modèle no.        | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                       | Modèle no.                                                                                                                            | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>201.3000.0</b> | <b>1 Tiroir</b><br>avec poignée, rail de roulement,<br>pour le montage postérieur<br>aux chariots de 580 mm de large<br>(dimensions int. :<br>510 x 413 x 90 mm, L x P x H)                                                                                               | <b>201.0050.0</b> | <b>2 Roulettes</b><br>75 mm diam., avec frein<br>                                                                                                                                                | <b>201.1300.0</b>                                                                                                                     | <b>Support articulé<br/>porte-câble</b><br>avec clameau de fixation 201.1910.0,<br>16 mm de diam.<br>                                                                                               |
| <b>201.1170.0</b> | <b>1 Cuvette ronde<br/>en acier inox</b><br>320 mm de diam.,<br>avec clameau de<br>fixation 201.1900.0,<br>10 mm de diam.<br>                                                             | <b>201.1250.0</b> | <b>Statif à perfusion C€</b><br>avec 4 crochets,<br>avec clameau de fixation<br>201.1920.0, 18 mm de diam.,<br>en 2 parties, charge maximale<br>d'utilisation par crochet : 2 kg<br>             | <b>201.1610.0</b>                                                                                                                     | <b>Distributeur pour<br/>matériel d'injection</b><br>gris, système du premier entré/<br>premier sorti, avec set universel<br>à droite, (prière de prévoir<br>des pièces de fixation 201.1700.0)<br> |
| <b>201.1640.0</b> | <b>Distributeur pour<br/>matériel d'injection</b><br>gris, système du premier entré/<br>premier sorti, sans set universel<br>(prière de prévoir des pièces<br>de fixation 201.1700.0)<br> | <b>201.1650.0</b> | <b>Distributeur pour<br/>matériel d'injection</b><br>gris, système dernier entré/<br>premier sorti, avec set universel<br>à droite, (prière de prévoir<br>des pièces de fixation 201.1700.0)<br> | <b>201.1660.0</b>                                                                                                                     | <b>Distributeur pour<br/>matériel d'injection</b><br>gris, système dernier entré/<br>premier sorti, sans set universel<br>(prière de prévoir des pièces<br>de fixation 201.1700.0)<br>              |
| <b>201.1700.0</b> | <b>1 Paire de pièces de fixation</b><br>pour distributeurs<br>201.1610.0, 201.1640.0,<br>201.1650.0 et 201.1660.0<br>                                                                   | <b>201.1800.0</b> | <b>Console</b><br>en acier inox,<br>avec pièces de fixation,<br>pour médi-nets de 580 mm<br>de large<br>                                                                                       | <b>Pièces de fixation</b><br><b>201.1900.0</b> 10 mm de diam.<br><b>201.1910.0</b> 16 mm de diam.<br><b>201.1920.0</b> 18 mm de diam. |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>201.2100.0</b> | <b>Jeu de séparations<br/>pour tiroirs</b><br>pour médi-nets de 580 mm<br>de large<br>                                                                                                  | <b>201.2110.0</b> | <b>Jeu de séparations<br/>pour tiroirs</b><br>pour médi-nets de 580 mm<br>de large<br>                                                                                                         | <b>201.2600.0</b>                                                                                                                     | <b>Ouvre-ampoule<br/>CUPFIX</b><br>avec fixation<br>                                                                                                                                              |
| <b>201.2700.0</b> | <b>Set «Médi-Müll» 1,5 litres</b><br>20 boîtes en polypropylène<br>avec couvercle rouge,<br>avec support<br>                                                                            | <b>201.2710.0</b> | <b>Médi-Müll</b><br>carton de 100 boîtes à 1,5 litres,<br>sans support                                                                                                                                                                                                            | <b>201.2720.0</b>                                                                                                                     | <b>Support</b><br>comme modèle 201.2700.0,<br>cependant sans boîtes.<br>(Supports pour différents systèmes<br>disponibles sur demande)                                                                                                                                                 |
| <b>201.2800.0</b> | <b>Porte-sac à déchets</b><br>avec rouleau de sacs<br>en plastique, avec couvercle,<br>châssis en blanc gris<br>                                                                        | <b>201.2850.0</b> | <b>Rouleau de sacs<br/>de rechange</b><br>pour 201.2800.0                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |


# Couleurs pour la couche de laque et le rembourrage en similicuir

## Description du matériau

### Couche de laque



blanc gris RAL 9002

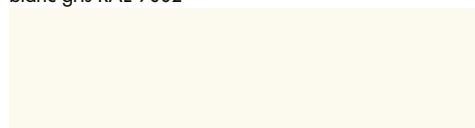

blanc pur RAL 9010



gris albâtre RAL 0007500\*



gris clair RAL 7035



gris anthracite RAL 7016



noir foncé RAL 9005



aluminium blanc RAL 9006



aluminium gris RAL 9007



jaune colza RAL 1009050\*




jaune de sécurité RAL 1003



orangé pastel RAL 2003



### Similicuir confort

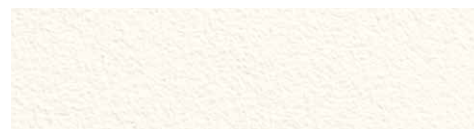

blanc fleurs 84



jaune or 86



mandarine 98



carmin 92



rouge framboise 103



bleu caraïbes 82




bleu atlantique 83



topaze 105




vert opaline 100

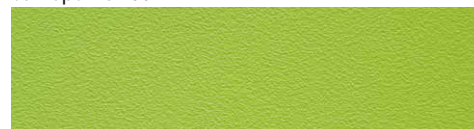


vert pomme 94




limette 99

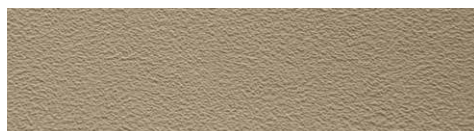


café au lait 102

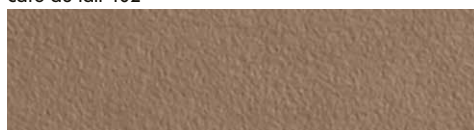

marron naturel 93

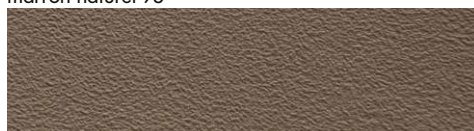

noisette 104

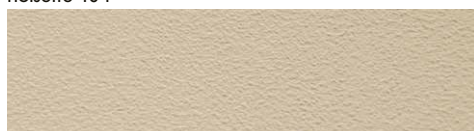


beige sable 101



gris pierre 96




gris ardoise 97

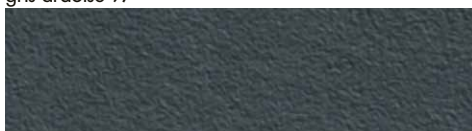


gris titane 91

## Similicuir classic

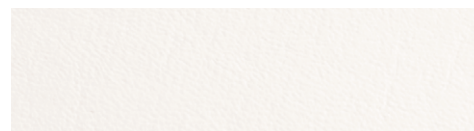


blanc 53

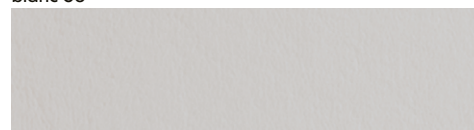

gris argenté 55



océan 52

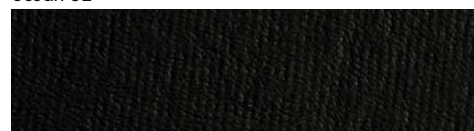

noir 57

## Matériau

Les corps d'armoires, portes, faces et socles sont en tôle d'acier. Châssis en tube d'acier de section ronde ou carrée.

## Roulettes

Toutes les roulettes n'encrassent pas le sol.

## Poignées

ergonomiques, distance de trous : 192 mm. La surface est facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux produits chimiques.

## Laquage

Revêtement thermolaqué de haute qualité, surface de grande brillance, résistant bien aux chocs et aux rayures, facile à nettoyer, résistant aux désinfectants, insensible aux influences climatiques.

Les châssis des divans etc. sont recouverts en série d'une couche de laque blanc gris RAL 9002, aluminium blanc RAL 9006, aluminium gris RAL 9007 ou bien chromés. Svp. faire attention aux descriptions des modèles individuelles.

D'autres revêtements selon notre nuancier pour les châssis des divans, des chariots médi-net, des tabourets sur demande moyennant supplément.

Les corps d'armoires et les portes battantes sont recouverts en série d'une couche de laque blanc gris RAL 9002, les socles ont

un revêtement en noir foncé RAL 9005; les poignées en blanc gris RAL 9002.

Les couleurs des laques selon notre nuancier sont aussi disponibles sans supplément pour les poignées.

D'autres revêtements selon notre nuancier pour les corps, les portes et les socles sur demande moyennant supplément.

D'autres revêtements dans les peintures RAL sur demande!

## Rembourrage

Mousse sur plaque support, avec revêtement similicuir résistant de premier choix, en deux qualités différentes.

Modèle confort :

Similicuir en 18 coloris.

Matériel résistant à l'usure de haute élasticité et souplesse garantissant un confort élevé en position assise ou allongée.

Surface grenée.

Disponible moyennant supplément. Voir notre tarif!

Modèle classic :

Similicuir en 4 coloris.

Matériel résistant à l'usure et élastique.

Surface lisse.

Disponible sans supplément.

## Nous vous recommandons : Produit de nettoyage spécial pour similicuir Référence 2019878

Vaporisateur de 500 ml (vendus par 3)

## Set de nettoyage pour similicuir Référence 2026973

1 x vaporisateur de 500 ml et 1 brosse

Vous trouverez toutes les informations concernant le nettoyage et la désinfection des rembourrages dans le mode d'emploi spécifique.



# **SCHMITZ u. Söhne GmbH & Co. KG**

B. P. 14 61  
58734 Wickede (Ruhr)  
Zum Ostenfeld 29  
58739 Wickede (Ruhr)  
Allemagne  
tél. +49 (0)2377 84 0  
téléc. +49 (0)2377 84 135  
www.schmitz-soehne.com  
export@schmitz-soehne.de

Pour ces produits et leurs accessoires, qui sont caractérisés par le marquage « CE », les prescriptions de la loi MPG (sur les dispositifs médicaux) et les directives CE, no. 93/42/CEE ont été prises en considération.



Les produits doivent uniquement être utilisés pour l'usage prévu. SVP, reportez-vous également à notre mode d'emploi!



[f/schmitz.soehne](https://www.facebook.com/schmitz.soehne)

# **SCHMITZ en France :**

SCHMITZ SAS  
Espace 23  
23, rue des Granges Galand  
37550 Saint Avertin, France  
tél. +33 (0) 247 20 96 01  
cell +33 (0)6 25 33 19 09  
www.schmitz-soehne.com  
info@schmitz-soehne.fr

# **SCHMITZ en Suisse :**

SCHMITZ AG  
Caroline Meynis de Paulin  
Bahnhofplatz 2  
3284 Fräschels, Schweiz  
tél. +41 (0)31 75565 88  
téléc. +41 (0)31 75565 89  
cell +41 (0)79 1376590  
info@schmitz-suisse.ch

**Visitez notre site internet  
pour plus d'informations  
concernant nos agences  
à l'étranger.**

Gynécologie, Urologie et  
Proctologie  
Notre réponse aux exigences  
d'un équipement parfait  
et confortable



vidan®

Le vidéocolposcope Full HD



Partura®

Le lit d'accouchement SCHMITZ  
solution confortable et sûre –  
pour une obstétrique préventive



Nos prestations s'entendent départ usine. Toutes livraisons sont effectuées moyennant nos partenaires autorisées ou par nos succursales. Tous droits de modifications de construction et dimensions réservés, de minimes variations techniques sont possibles. Pour des raisons matérielles des différences de couleur sont possibles. Les articles de ce catalogue ne sont pas autorisés à la vente aux États-Unis. Catalogue SCHMITZ No. 70, 01.2018 FR  
Prix forfaitaire 3,00 Euro

