




arco-matic® – La nouvelle génération de fauteuils d'examen gynécologiques

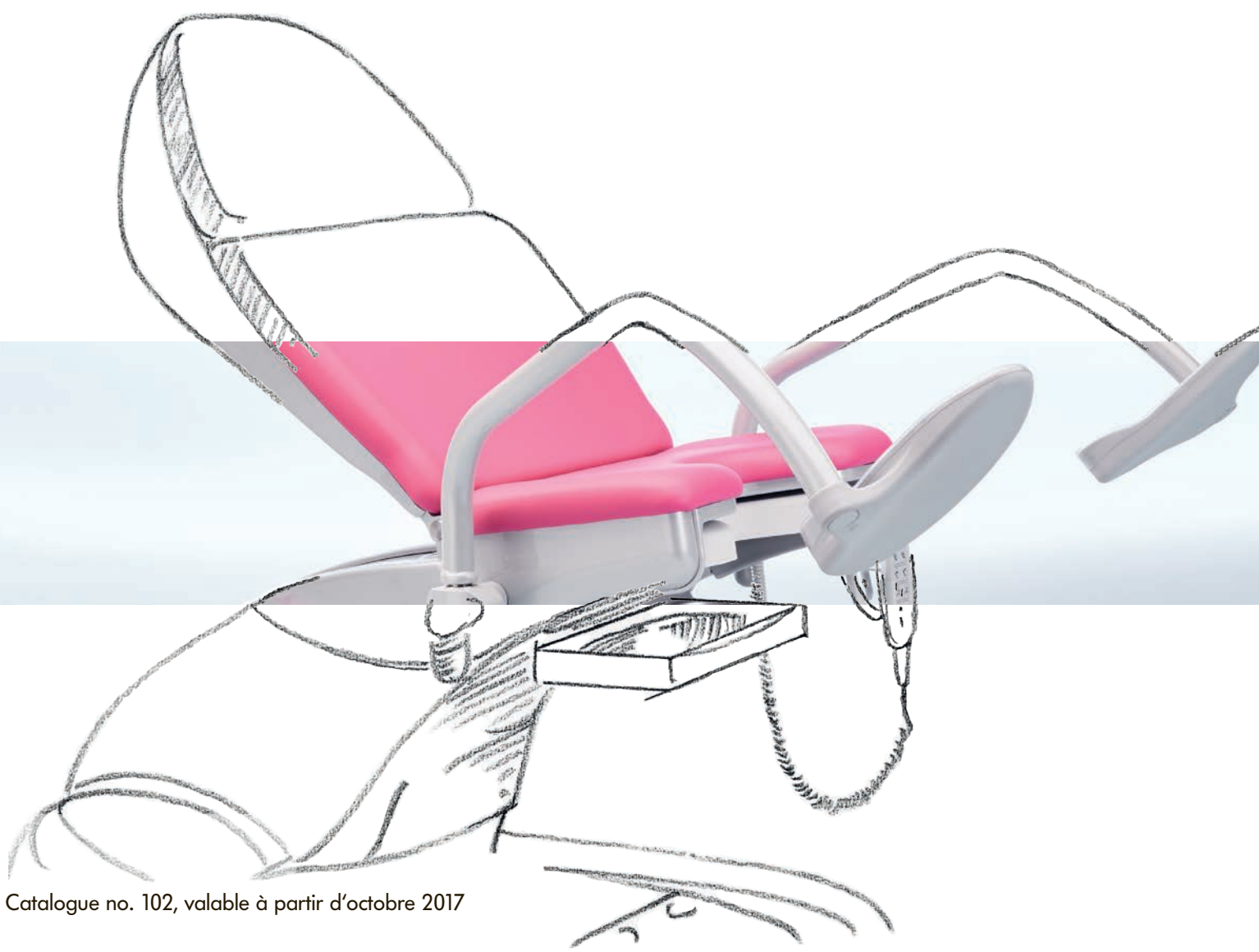

arco-matic®

Utilisation optimisée, confort accru, design exceptionnel

Les fauteuils d'examen gynécologique de la nouvelle série arco-matic® allient design remarquable, technologie des plus modernes et rapport qualité/prix imbattable.

Ergonomique

Une largeur des coussins de jusqu'à 685 mm au niveau du dos associée au coussin de tête à fixation aimantée adaptable à la patiente, ils lui garantissent une sensation de confort. Grâce à sa faible hauteur d'accès de seulement 550 mm, il permet également aux patientes plus âgées ou à mobilité réduite d'y prendre place facilement. L'assise reste toujours bien à l'horizontale, même dans la position la plus basse.

Résistant

Prévu pour résister à une charge d'utilisation de 250 kg, le fauteuil permet de soigner les patientes souffrant d'une surcharge pondérale en toute sécurité.

Rapide

Une vitesse de réglage optimisée ainsi que la possibilité de choisir quatre positions mémorisées permettent au praticien de régler rapidement le dispositif dans la position souhaitée.

Fonctionnel

Le dossier peut être positionné à l'horizontale de sorte que la patiente puisse être allongée, par exemple pour procéder à une échographie, ou que la mise en position déclive soit possible en cas d'urgence. La profonde découpe gynécologique de 155 mm garantit un meilleur accès au champ d'examen. La cuvette reste en position horizontale, même en cas de surélévation du bassin.

Mobile

Le fauteuil d'examen peut être rendu mobile grâce à des roulettes cachées (en option), vous permettant ainsi d'utiliser l'espace de traitement et d'organiser la pièce à votre convenance. Un dispositif de blocage centralisé permet de positionner le dispositif rapidement et en toute sécurité.

Hygiénique

Les surfaces planes et fermées ainsi que l'absence de coins ou d'arêtes assurent une hygiène optimale et un nettoyage aisé. Rendre l'arco-matic® mobile (fonctionnalité en option) permet aussi de nettoyer l'espace situé dessous.

Made in Germany





reddot award 2017

arco-matic® avec Orbit

Un concept évident pour les cabinets de gynécologie



Que ce soit de par sa faible hauteur d'accès, pratique pour les patientes, une fonction de mémoire qui permet un réglage rapide dans la position souhaitée ou la profonde découpe gynécologique qui facilite l'examen, le fauteuil d'examen arco-matic® est adapté aux besoins spécifiques quotidiens de votre cabinet médical.

Le concept modulaire de soins et de collecte pour poste de travail gynécologique Orbit, s'adaptant à tous les environnements de travail, complète à merveille le fauteuil d'examen arco-matic®, qui s'intègre ainsi parfaitement au sein d'un équipement fonctionnel, décliné dans de nombreuses couleurs attrayantes.

Veuillez consulter notre catalogue no. 75 ou bien notre site Web pour des détails sur notre gamme Orbit.



Couleurs illustrées

arco-matic® :

Rembourrage rouge framboise 103

Éléments en matière plastique gris argenté

Tabouret pivotant :

Rembourrage rouge framboise 103

Orbit :

Corps aluminium blanc RAL 9006

Façades violet bruyère RAL 4003

Poignées semicirculaires aluminium blanc RAL 9006

Éléments en matière plastique gris argenté

arco-matic® pour la gynécologie CE



Description

arco-matic® 200 M 114.9600.0


Fauteuil d'examen et de traitement, fonction de mémoire 4 positions, réglage électrique de la surélévation du bassin et du dossier, hauteur d'assise réglable de 550 mm à 1 000 mm via la surélévation du bassin. Activation des fonctions de réglage ainsi que des fonctions mémoire par commande à la main et au pied.

arco-matic® 300 M 114.9700.0

Fauteuil d'examen et de traitement avec fonction mémoire 4 positions, **réglage électrique** de la surélévation du bassin, du dossier et des **supports de pieds (accessoire)**, hauteur d'assise réglable de 550 mm à 1 000 mm via la surélévation du bassin. Activation des fonctions de réglage ainsi que des fonctions mémoire par commande à la main et au pied.

Attention !

Les versions de base ne comprennent pas de système de soutien des jambes, veuillez en choisir un parmi les 3 proposés ! (pages 8/9)

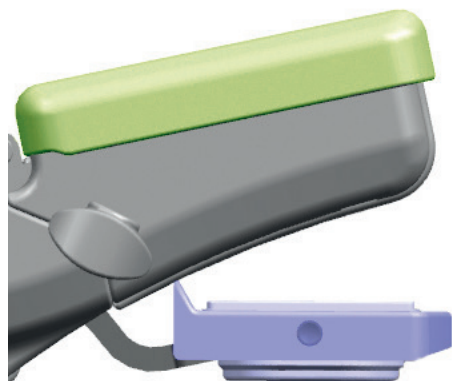

Cuvette en acier au nickel-chrome, placée dans une structure en plastique, montage suspendu permettant de maintenir une même position (parallélogramme).



Commande au pied et commande manuelle

- Positionnement flexible de la commande au pied amovible pour un travail détendu et confortable ;
- Enregistrement et demande de jusqu'à 4 positions mémorisées ;
- Mise en mouvement en douceur du fauteuil ;
- Commande de tous les mouvements par la commande au pied et la commande manuelle.

Équipement standard :

Coussins du siège, du dossier et du repose-tête ergonomiques rembourrés, cuvette en acier inox, placée dans une structure en plastique, montage suspendu permettant de maintenir une même position (parallélogramme), amovible, 325 x 175 x 65 mm (l x L x h), 2,5 litres. Magasin pour rouleau de papier 400 ou 500 mm de largeur, diamètre max 140 mm. Avec commande au pied, plaque de base avec 4 vis de réglage, revêtement plastique gris argenté, revêtement des coussins selon notre nuancier. Avec support pour les jambes permettant de retirer rapidement les supports de pieds ou appui-jambes de Göpel avec poignée intégrée ou de les faire pivoter horizontalement (non disponible sur les équipements avec rails latéraux).

Câble de raccordement de 3 m avec fiche de secteur, raccordement : 100 - 240 V, 50/60 Hz, max. 0,94 kW. Versions spécifiques à un pays sur demande.

Poids net : env. 96 kg
(114.9600.0)


Poids net : env. 100 kg
(114.9700.0)

Charge maximale d'utilisation : 250 kg

Laquage :

Revêtement thermolaqué de grande qualité en RAL 9006 aluminium blanc. Surface brillante, extrêmement résistante aussi bien aux chocs qu'aux rayures. Facile à nettoyer, résistant aux désinfectants, insensible aux influences climatiques.

Réglage, Dimensions :

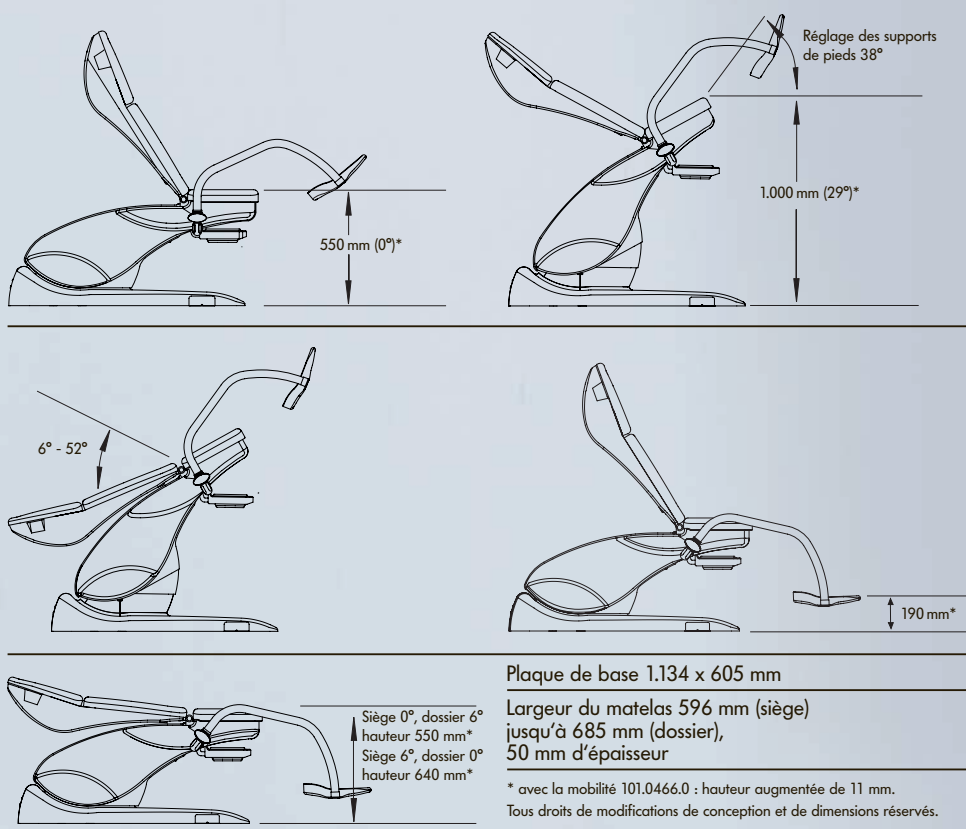

Rembourrage :

Mousse sur plaque de support avec revêtement en similicuir résistant, de première qualité. Couleurs disponibles selon le nuancier SCHMITZ en 4 coloris pour le rembourrage dans la qualité classique et 18 coloris dans la qualité confort.

Renseignements pour la commande :

Lors de la commande d'un fauteuil de la série arco-matic®, il vous est demandé de nous fournir les informations suivantes : coloris des coussins/matelas, voir nuancier.



Surélévation du bassin
114.9600 et 114.9700.0



Réglage du dossier
114.9600 et 114.9700.0



Réglage électrique des supports de pieds
114.9700.0

arco-matic®

Système de positionnement des jambes

1

Supports de pieds (paire) 101.0492.0

avec poignées intégrées, revêtement thermolaqué RAL 9006 aluminium blanc. Peuvent pivoter et être bloqués. Housses plastiques pour la protection des supports de pieds.

2

Appui-jambes selon Göpel avec poignée intégrée (paire) 101.0493.0

avec poignées intégrées, revêtement thermolaqué RAL 9006 aluminium blanc. Mousse intégrale en gris argent pour les appuis-jambes, avec courroie de fixation, tige en acier inox 18/10.

3

Appui-jambe de Göpel (pièce) 101.0459.0

Mousse intégrale en gris argent, avec courroie de fixation, tige en acier inoxydable 18/10, sans étau. (SVP, prévoir des rails latéraux 101.0463.0 et des étaux 101.1670.0)

Rails latéraux (paire) 101.0463.0

pour le siège, en acier inox 25 x 10 mm, 290 mm de longueur.

Etau (pièce) 101.1670.0

orientable, en acier inoxydable 18/10, pour montage sur les rails latéraux.





2

101.0493.0



3

101.0452.0, 101.0463.0 et 101.1670.0

arco-matic®

Accessoires

1

Housse en similicuir (paire) 101.0473.0
pour les poignées intégrées des supports de pieds,
selon nuancier, avec fermeture-éclair.

2

Housse en similicuir (paire) 101.0474.0
pour les poignées intégrées des appuis-jambes de
Göpel, selon nuancier, avec fermeture-éclair.

3

Coussin pour la tête 101.0472.0
avec fixation magnétique, revêtement en similicuir
selon nuancier.

4

Housse protecteur (paire) 101.0475.0
en matière plastique transparente,
pour les supports de pieds.

5

Rouleau de papier 101.0489.0
largeur de 500 mm, pour le magasin intégré.

Housse protecteur 101.0477.0
pour le rembourrage du siège.
(sans ill.)

6

Cuvette avec support confort 101.0495.0
assurant une position horizontale du bassin, bassin
en acier au nickel-chrome avec cadre plastique,
dimensions : 325 x 175 x 65 mm (l x L x h),
volume : 2,5 litres.



1

101.0473.0



2

101.0474.0



3

101.0472.0



4

101.0475.0



5

100.0489.0



6

101.0495.0



6

101.0464.0



7

101.0482.0 et 101.0481.0



9

101.0487.0 et 101.0488.0



11

101.0466.0



8

101.0494.0



10

101.0469.0

6

Rail latéral (pièce) 101.0464.0
pour le siège, en acier inox 25 x 10 mm,
150 mm de longueur.

7

2 Prises de courant 101.0482.0
selon EN 60601-1. (pas de montage ultérieur)

2 Prises de courant 101.0483.0
modèle identique au 101.0482.0,
mais version spéciale pour la Suisse.
(pas de montage ultérieur)
(sans ill.)

Prise de compensation de potentiel 101.0481.0

8

Support de colposcope 101.0494.0
pour les systèmes Leisegang, Leica, Kaps et Zeiss,
peut être monté à droite ou à gauche. Pour les
systèmes Kaps et Zeiss, svp, commander le tube
de raccordement avec la porte-plaquette chez
votre fournisseur du colposcope!
(sans colposcope)

9

Éclairage d'ambiance LED 101.0487.0
Éclairage LED bidirectionnel situé juste au-dessus du
cache coloré, choix parmi 13 couleurs différentes,
changement de couleur au moyen de l'interrupteur
placé sous le cache coloré, couleur par défaut
préréglée en fonction de la couleur des coussins.
(LED blanche pour les coussins marron, noirs et gris.)

Cache coloré 101.0488.0

teinte identique à la couleur des coussins.

10

Support pour les pieds du médecin 101.0469.0
montage à gauche (PDV de la patiente).

Support pour les pieds du médecin 101.0468.0

montage à droite (PDV de la patiente).
(sans ill.)

11

Mobilité 101.0466.0
2 roulettes doubles pivotantes Ø 75 mm,
4 roulettes de direction fixe Ø 50 mm, antistatiques,
avec blocage central. (montage ultérieur possible)

Note :
**Ce dispositif n'est pas conçu pour
le transport de patients!**

Blocage central

arco-matic®

Accessoires

1

Plateau de jambes 101.0471.0

intégré dans le cadre du siège, escamotable, avec matelas en matériel plastique « soft-touch » (PTE), en gris. Charge maximale d'utilisation 50 kg
Dimensions du matelas: l 480 x L 373 x h 30 mm.

2

Appui-bras 101.0019.0

rembourrage de mousse intégrale, 450 mm de long, antistatique, avec sangle de fixation et étai, réglable horizontalement et verticalement, peut basculer grâce à une articulation sphérique, modèle en acier inoxydable.

3

Rails latéraux (paire) pour le dossier 101.0465.0

en acier inox 18/10, 25 x 10 mm, 400 mm de longueur, montage au dossier, pour le montage d'accessoires.



Position allongée avec le plateau de jambes

101.0471.0



1

101.0471.0



2

101.0019.0



3

101.0465.0


Modèle de planification



Couleurs arco :
Rembourrage limette 99
Revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006
Éléments en matière plastique gris argenté

Couleur siège d'examen :
Rembourrage limette 99

Couleurs Orbit :
Corps aluminium blanc RAL 9006
Façades vert feuillage RAL 1206050
Poignées semicirculaires vert citron RAL 1008060
Éléments en matière plastique gris argenté

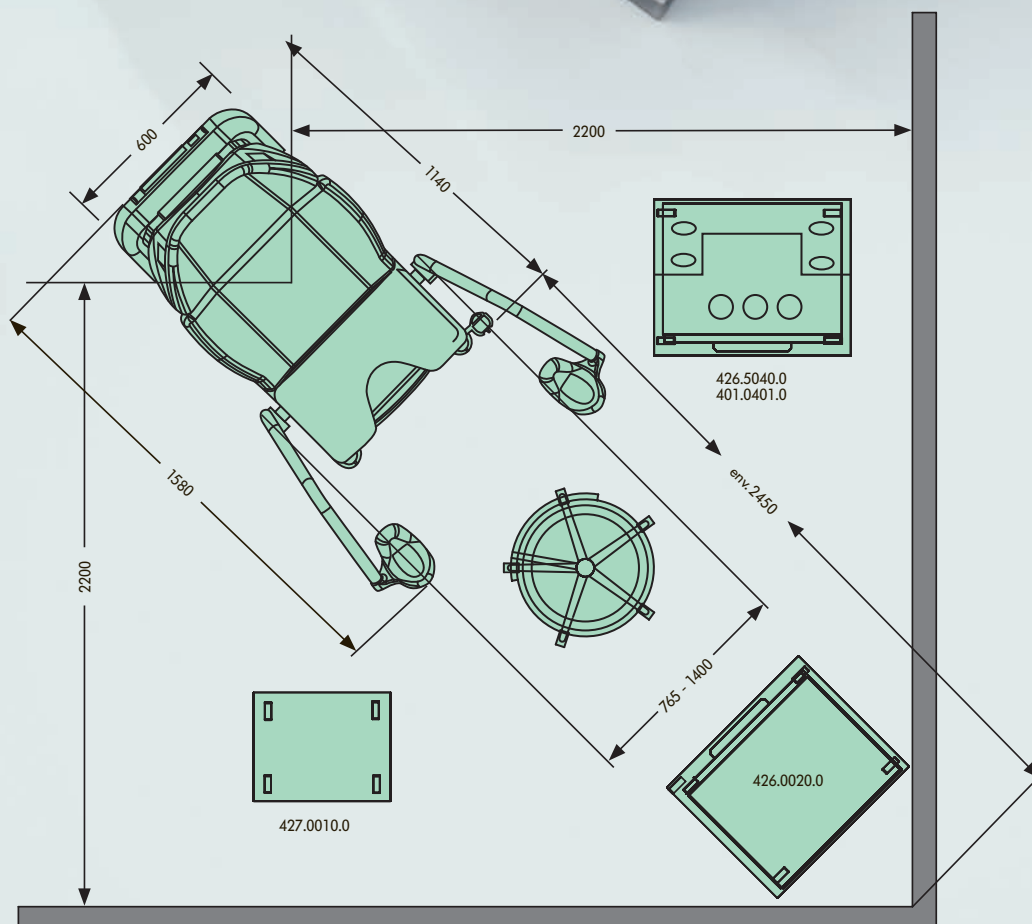


Configurateur de couleurs en ligne : Optez pour la couleur de votre choix



Similicuir confort



Similicuir classic

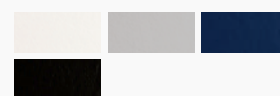

Couleurs sélectionnées :

Rembourrage :

rouge framboise 103

Éléments en matière plastique :

gris argenté

S'il vous plaît noter : Selon votre moniteur et son niveau de résolution et type de carte vidéo, les couleurs représentées par le configurateur de couleurs peuvent s'écarter des couleurs véritables. Nous ne pouvons donc pas assumer la responsabilité quant à leur exactitude.

Modèle illustré : 114.9700.0 avec les supports de pieds 101.0492.0, les housses en similicuir 101.0473.0, le plateau de jambes 101.0471.0, la cuvette avec support de confort 101.0495.0 et le cache coloré 101.0495.0.

Voyez le monde en couleurs

Grâce au configurateur de couleurs en ligne de SCHMITZ, testez les différentes combinaisons de couleurs et prenez le temps d'y réfléchir.

Associez à votre guise les 22 teintes de coussin pour créer différentes ambiances dans vos salles d'examen.


Froide ou vive, classique ou moderne, élégante ou extravagante, chez nous, vous trouverez rapidement la couleur qui vous convient.

Laissez-vous inspirer :

www.schmitz-soehne.com

Couleurs pour les revêtements en similicuir et matières plastiques

Similicuir confort

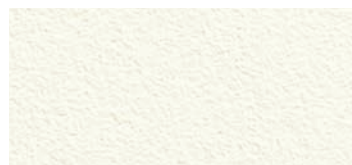


blanc fleurs 84



jaune or 86



mandarine 98

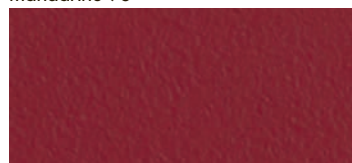


carmin 92



rouge framboise 103



bleu caraïbes 82

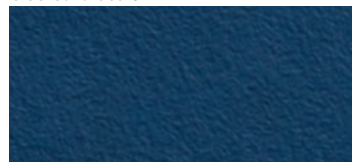

bleu atlantique 83




topaze 105




vert opaline 100



vert pomme 94

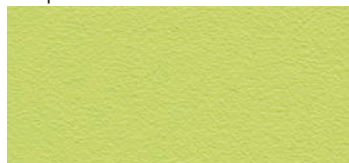

limette 99

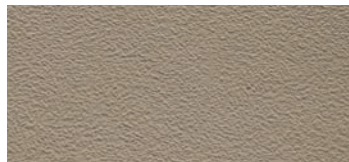


café au lait 102




marron naturel 93



noisette 104

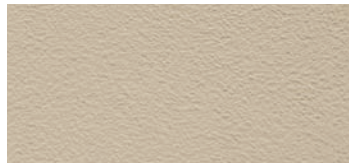

beige sable 101

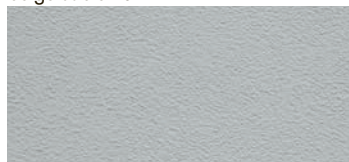

gris pierre 96




gris ardoise 97



gris titane 91

Similicuir classic

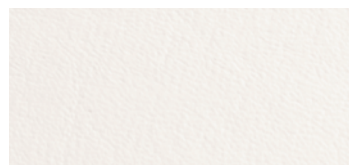

blanc 53



gris argenté 55




océan 52



noir 57

Matière plastique

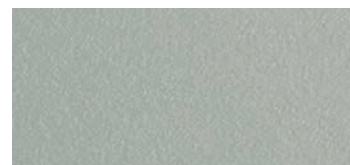

gris argenté

Nous vous recommandons :
Produit de nettoyage spécial pour similicuir
Référence 2019878

Vaporisateur de 500 ml. (vendus par 3)

Set de nettoyage pour similicuir
Référence 2026973

1 x vaporisateur de 500 ml et 1 brosse.

Vous trouverez toutes les informations concernant le nettoyage et la désinfection des rembourrages dans le mode d'emploi spécifique.



SCHMITZ u. Söhne GmbH & Co. KG

B. P. 14 61
58734 Wickede (Ruhr)
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)
Allemagne
tél. +49 (0)2377 84 0
téléc. +49 (0)2377 84 135
www.schmitz-soehne.com
export@schmitz-soehne.de

Pour ces produits et leurs accessoires, qui sont caractérisés par le marquage « CE », les prescriptions de la loi MPG (sur les dispositifs médicaux) et les directives CE, no. 93/42/CEE ont été prises en considération.



Les produits doivent uniquement être utilisés pour l'usage prévu. SVP, reportez-vous également à notre mode d'emploi!



[f/schmitz.soehne](https://www.facebook.com/schmitz.soehne)

SCHMITZ en France :

SCHMITZ SAS
Espace 23
23, rue des Granges Galand
37550 Saint Avertin, France
tél. +33 (0) 247 20 96 01
cell +33 (0)6 25 33 19 09
www.schmitz-soehne.com
info@schmitz-soehne.fr

SCHMITZ en Suisse :

SCHMITZ AG
Caroline Meynis de Paulin
Bahnhofplatz 2
3284 Fräschels, Schweiz
tél. +41 (0)31 75565 88
téléc. +41 (0)31 75565 89
cell +41 (0)79 1376590
info@schmitz-suisse.ch

**Visitez notre site internet
pour plus d'informations
concernant nos agences
à l'étranger.**



Gynécologie, Urologie et
Proctologie
Notre réponse aux exigences
d'un équipement parfait
et confortable



vidan®
Le vidéocolposcope Full HD



varimed®
Mobilier d'examen
et de traitement



Partura®
Le lit d'accouchement SCHMITZ
solution confortable et sûre –
pour une obstétrique
préventive



Nos prestations s'entendent départ usine. Toutes livraisons sont effectuées moyennant nos partenaires autorisées ou par nos succursales. Tous droits de modifications de construction et dimensions réservés, de minimales variations techniques sont possibles. Pour des raisons matérielles des différences de couleur sont possibles. Les articles de ce catalogue ne sont pas autorisés à la vente aux États-Unis. Catalogue SCHMITZ No. 102, 10.2017 FR
Prix forfaitaire 3,00 Euro