


CARLA FOCUS


Lampe spéciale Gynécologie et Andrologie

Lampe d'examen très compacte et robuste qui offre un éclairage très localisé et précis (faisceau 10°) diffusant une lumière blanche et énergisante (blanc neutre) pour un rendu fidèle des différentes nuances de couleurs des tissus éclairés : Vulves, muqueuse de la paroi vaginale, col de l'utérus... sans aucune source de chaleur pour un confort maximal des patientes.

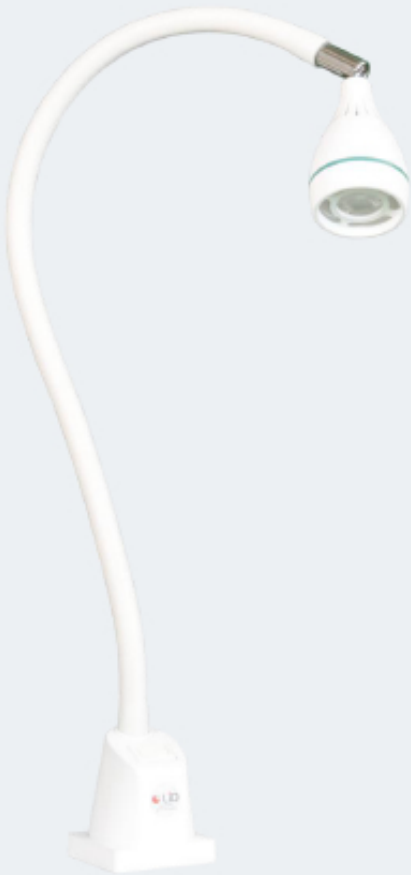

La lampe peut être fixée sur un rail du fauteuil d'examen en position horizontale avec l'étau ETRTPM008 pour un plus grand confort d'utilisation

Idéale pour les examens qui demandent beaucoup de précision, la Carla Focus (avec flexible 100 cm ou 123 cm) permet de travailler en sur/sous épaule et ainsi d'avoir un éclairage direct localisé sans être gêné par l'emplacement de la lampe (Même lors d'une utilisation combinée avec un colposcope).

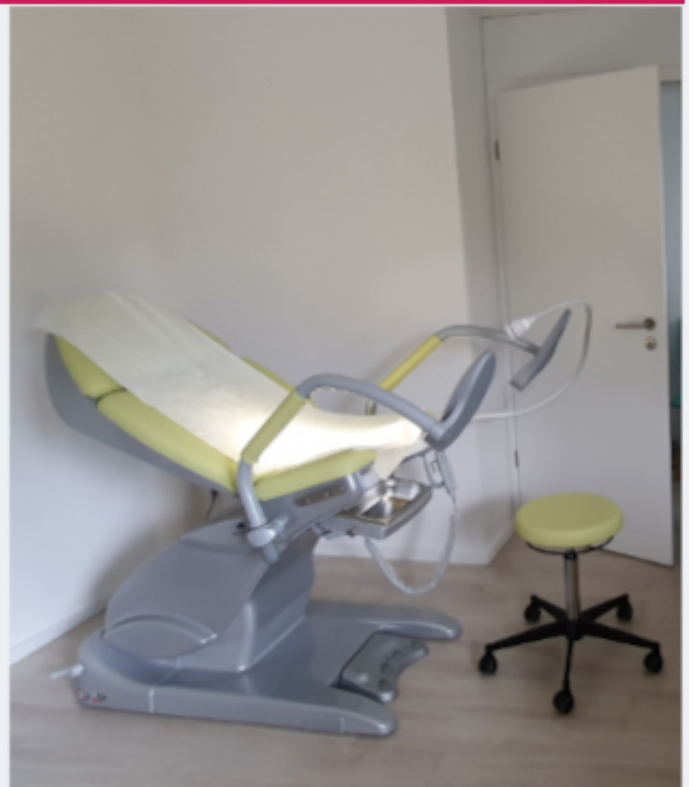

Intensité lumineuse produite : 420 lumens*


Température de couleur : 4500°Kelvin

Rendu des couleurs (IRC) : 95/100

Consommation électrique : 4,2 W

Dispositif médical de Classe I



Lux*	Faisceau 10°	Distance	Diamètre éclairé
90 000		30 cm	10 cm
27 000		50 cm	15 cm
7 000		100 cm	25 cm

*Tolérance des données +/- 10%



- Longévité des LED : 50 000 heures minimum (LED sur circuit imprimé, pas d'ampoule à remplacer)
Aucune production d'UV ou d'infrarouge
- Protection électrique : isolation classe II
- Normes : EN 60 601 -1/ -2-41 EN 60 598-2-25
- Câble d'alimentation longueur 3 mètres
- Couleur : blanc ou noir
- Dimension de la tête : 6 x 9,5 cm
- Longueur bras flexible: 65 cm, 100 cm ou 123 cm
- Option : interrupteur sans contact
- L'ensemble de la lampe est nettoyable et désinfectable

Fixations : Etau simple, étau universel, étau pour rails médicaux, pied roulant télescopique, bras mural articulé (2 x 40 cm)

REFERENCES

	Interrupteur on/off	Interrupteur sans contact
Flexible 65 cm	LEDS0650	LEDS0650-ISC
Flexible 100 cm	LEDS0900	LEDS0900-ISC
Flexible 123 cm	LEDS1200	LEDS1200-ISC



Personnaliser sa lampe

Pour la plupart des lampes, vous pourrez choisir différentes longueurs de bras flexibles, la couleur (blanc ou noir) et différents interrupteurs (on/off, variateur d'intensité ou ISC : interrupteur sans contact)



Ergonomie et Hygiène grâce à l'interrupteur sans contact

La lampe s'allume et s'éteint en passant la main à 3 cm maximum de l'interrupteur.

Les conditions d'hygiène exigées dans le domaine médical peuvent ainsi être respectées en réduisant le risque d'infection par contamination croisée.

Définir sa fixation

En fonction de votre spécialité et de la configuration de votre cabinet, nous vous proposons un large choix de fixations : mobiles, murales, à poser ou fixer directement sur un meuble ou un divan

